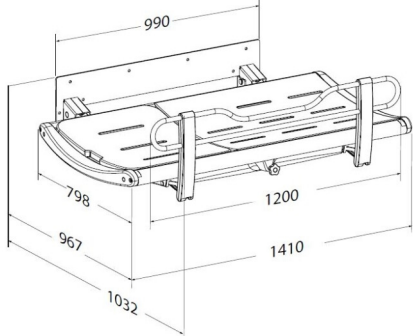




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret R8435313301
Farve	VVS: 777543143 EAN: 5708590374024 HMI: 130168 FDA: INT/D124320 Grafitgrå (RAL 7024)
Produktbeskrivelse	 <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>SCT 3000 serien har et stilfuldt og prisbelønnet design med fokus på komfort og brugervenlighed.</p> <p>SCT 3000 bruseleje, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. sengehest, afløbsslange (Ø32 mm) og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Liggeflade 1300 mm, udvendige mål: 1032 mm x 1410 mm. Ekskl. monteringskraver til væg.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 210 kg. Når briksen belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 60 kg. <i>Briksen er testet statisk med 315 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål, aluminium, kunststof (PVC, polystyren). Puder i polyuretanskum, er testet i henhold til standarden DIN EN 1021-1 (flammebestandighed).



Produkt	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8435313301
Ergonomi	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren.• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen.• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen (Ø32 mm) fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.• Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed.• Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender.• Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.

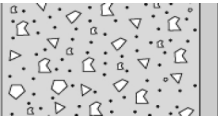
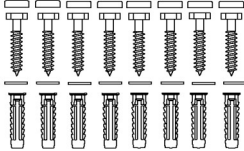

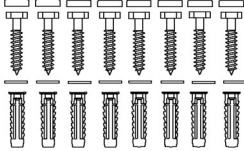
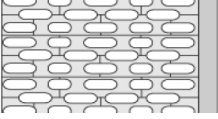
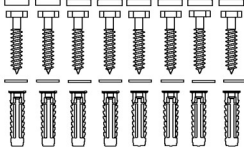
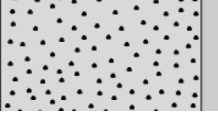
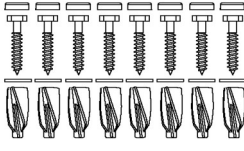
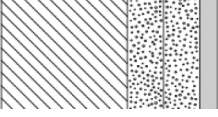
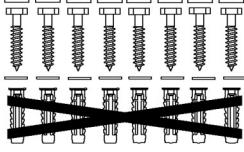


Produkt	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8435313301
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

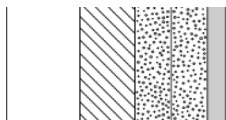
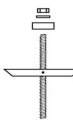


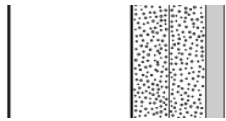
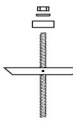


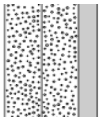



Produkt	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8435313301

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hz12 V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8663 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8613 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SCT 3000 bruseleje, fastmonteret R8435313301	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.