




Produkt Produktnummer	PLUS Wandschiene, 1800 mm R9818112
Farbe	Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	<p>VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743</p>  <p>PLUS Wandschiene ermöglicht das Einhängen und die waagerechte Einstellung von Stützklappgriffen, Duschsitzen und Waschtisch-Liftern. Eine Auswahl möglicher Produkte, die in die Wandschiene eingehängt werden können, finden Sie weiter unten.</p> <p>PLUS Wandschiene, 1800 mm, zur waagerechten Montage. Verdeckte Befestigungen hinter der Abdeckplatte. Leicht zu reinigen. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Maximale Belastbarkeit: ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand - vertikal belastbar bis zu 1000 kg
Materialien Ergonomie Funktionen	<p>Die Wandschiene besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckplatte besteht aus Polystyrol. Die Schienenenden sind mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen.</p> <p>Die waagerechte Wandschiene macht die Einrichtung flexibel. Durch die Verschiebbarkeit der Produkte können optimale Bedingungen für den Benutzer, Helfer oder Mobilitätshilfen geschaffen werden. Der Raum kann perfekt genutzt werden.</p> <p>Die Wandschiene verteilt das Gewicht des jeweiligen Badezimmerproduktes über die Länge der Schiene. Die Produkte können mit intuitiven Einstellungs- und Sperrfunktionen an der Wandschiene verrigelt werden. Die Abdeckplatte verbirgt Montageschrauben und evt. Leistungen.</p>
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.



Produkt	PLUS Wandschiene, 1800 mm
Produktnummer	R9818112
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	<p>Dieses Produkt erfüllt somit sämtliche relevante Forderungen in Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte in Risikoklasse I. Dieses Produkt wird als Zubehör für Medizinprodukte angesehen, da es selbst kein Medizinprodukt ist, aber zusammen mit mehreren bestimmten Medizinprodukten verwendet werden soll, und der speziell deren Verwendung gemäß ihrer Zweckbestimmungen ermöglicht.</p>

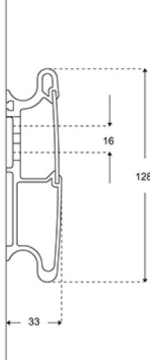

Produkt	PLUS Wandschiene, 1800 mm
Produktnummer	R9818112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8670 - Befestigungsmaterial, 3 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</p> <p>V8620 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Wandschiene, 1800 mm
Produktnummer	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®