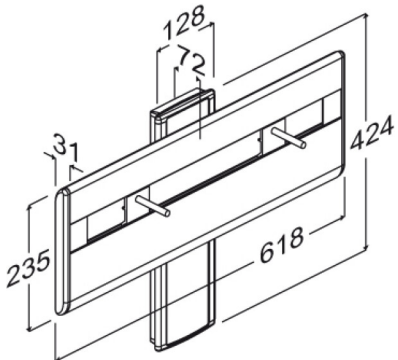




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjddreglerbar R4550112
Färg	VVS: 654001110 NRF: 6132527 RSK: 7972586 EAN: 5708590309385 HMI: 71763 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjddjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ, manuell höjddreglerbart 240 mm, antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ. Exkl. monteringsskruvar för vägg.
Justerbar Höjddjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 240 mm Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 57 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället.</i>



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjddreglerbar R4550112
Funktioner	Viktigt ! Ej avsedd för daglig höjjustering. Vid daglig höjjustering rekommenderas gasdriven upphängning R4650 eller eldriven upphängning R475x.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

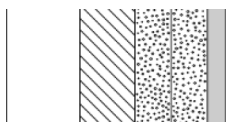
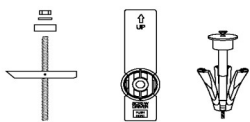
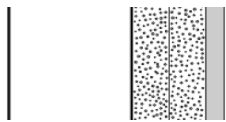
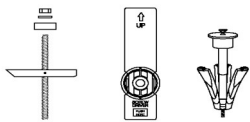
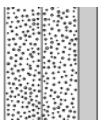
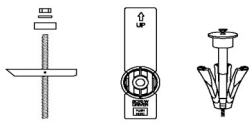
Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt
Varunummer	R4550112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjddreglerbar R4550112
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

pressalit.com