




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar R5520112112
Kleur	VVS: 777531212 NRF: 7501004 EAN: 5708590321349 HMI: 130158 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Antracietgrijs
Beschrijving	 PLUS opklapbaar zitje. Handmatig in hoogte verstelbaar met 240 mm. Antraciet afdekplaat voor verticale wandrails. De zitting is opklapbaar. Excl. bevestigingsmateriaal. Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche. PLUS opklapbaar zitje. Handmatig in hoogte verstelbaar met 240 mm. Antraciet afdekplaat voor verticale wandrails. Materialen: aluminium, duroplast kunststof, kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 240 mm Maximale belasting: 265 kg. Wanneer de zitting is belast met 265 kg, is elke wandbevestiging belast met 23 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy Funktie	De opklapbare zitting is gemaakt van duroplast kunststof en de montage-en ophangbeugel zijn gemaakt van 10 mm geanodiseerd aluminium. De eindkappen zijn gemaakt van ABS-kunststof. Ergonomisch gevormde zitting, die een goede en comfortabele ondersteuning biedt. De zitting is geschikt voor situaties waarin extra zitplaatsen vereist zijn en de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld in keukens, liften en corridors van luchthavens. De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.

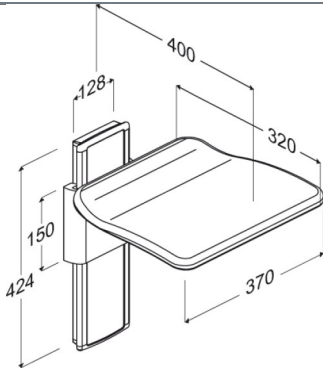

Product	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R5520112112
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R5520112112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8660 - Bevestigingsmateriaal, 8 bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8610 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, handmatig in hoogte verstelbaar R5520112112
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (8 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 