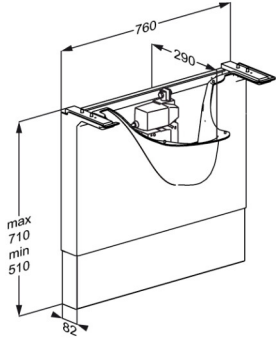




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, vänster, höjdreglerbar R4852000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 654022200 EAN: 5708590340920 HMI: 138112  MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdjusterbara versioner samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna. MATRIX upphängning till tvättställ, vägghängd, vänster, med vit monteringskåpa och inkl. dolt till- och avloppssystem. Elektrisk höjdreglerbart 200 mm med tryckknappar i framkant på tvättställ. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX ANGLE DEEP tvättställ, R2152/R2153). Material: Pulverlackerat stål och PMMA. Exkl. monteringsskrub för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 200 mm Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskrub belastad med 60 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.



PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, vänster, höjddreglerbar R4852000
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 11,75 mm/s Hastighet ner: 11,75 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	Pulverlackerat stål och PMMA. 230 LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6 CB9 Careline (Linak), IPX6 Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktat sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

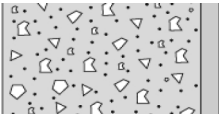
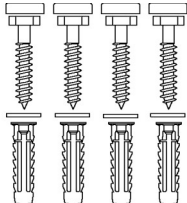
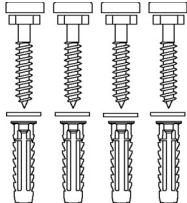
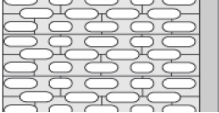
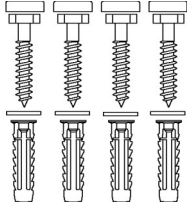
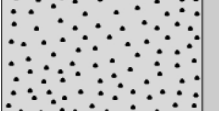
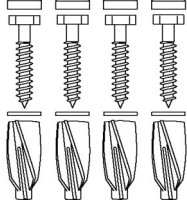
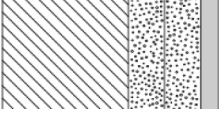
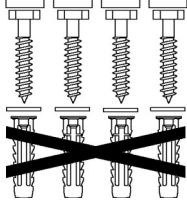
Product Varunummer	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, vänster, höjdreglerbar R4852000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

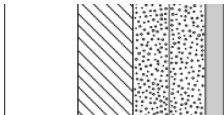
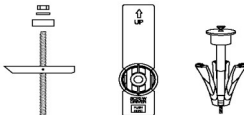
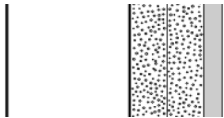
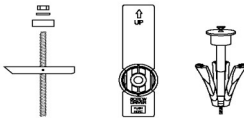
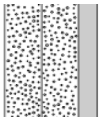
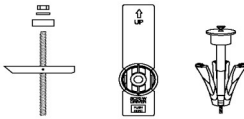
Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, vänster, höjdreglerbar
Varunummer	R4852000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, vänster, höjdroglerbar R4852000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®