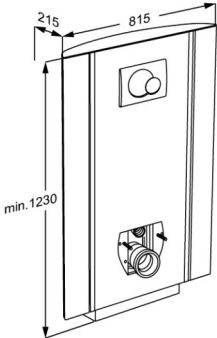




Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb
Varenummer	R8312000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 617996400 NRF: 6191027 EAN: 5708590341514 HMI: 105974</p>  <p>Det handler om daglig brug. Om at gøre det så let som muligt at komme på og af toilettet. Det handler om at lette arbejdet for plejeren og om at gøre det bekvemt og værdigt for borgeren.</p> <p>SELECT TL2 toiletløfter, 400 mm elektrisk højderegulerbar med håndbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L. Toiletkumme og toiletsæde skal bestilles separat. De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter. Til gulv afløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
Justerbarhed	Højderegulerbar
Reguleringshøjde	400 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 12 mm/s Hastighed ned: 12 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren. Topplade i kompaktlaminat. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.</i>



Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb
Varenummer	R8312000
Ergonomi	Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Afrundede hjørner og kanter gør rengøringen let og hurtig – ingen skjulte kanter og huller, hvor snavset kan gemme sig.
Funktioner	Toiletløfteren fås med en håndbetjening, der gør det let for brugeren selv eller for hjælperen at justere højden. Siddehøjden kan justeres med hele 400 mm fra 425 til 825 mm – også mens brugeren sidder på toilettet.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6
Styreboks	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

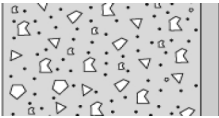
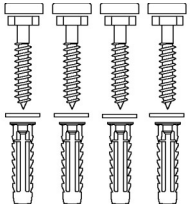

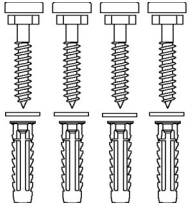
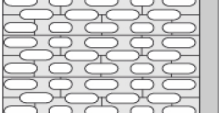
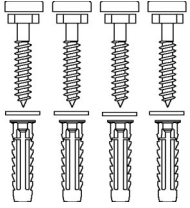
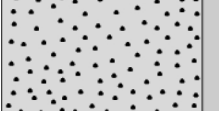
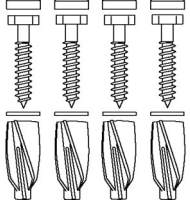
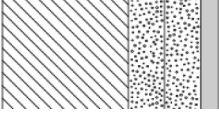
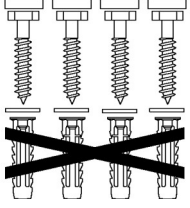


Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb
Varenummer	R8312000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
Overensstemmelses- erklæring	<p>Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr- Maskindirektivet 2006/42/EØF- RoHS-direktivet 2011/65/EU.

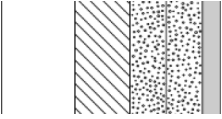
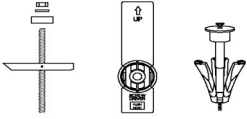
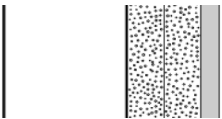
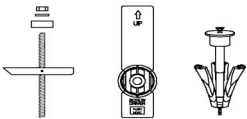
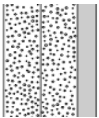



Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb
Varenummer	R8312000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulv afløb R8312000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.