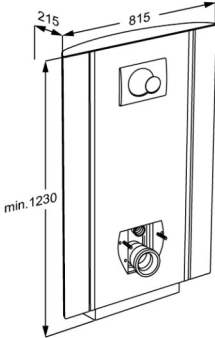




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL2 upphängning till toalett med sidoprofiler, till golvavlopp R8312000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:617996400 NRF:6191027 EAN:5708590341514 HMI: 105974  Det handlar om daglig användning. Om att göra det så lätt som möjligt att komma på och av toaletten. Det handlar om att underlätta vårdgivarens jobb och om att göra det bekvämt och värdigt för användaren. SELECT TL2 upphängning till toalett, eldriven höjdjusterbar 400 mm med manöverdosa. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L. Toalettskål och toalettsits måste köpas separat. De inbyggda lodräta sidoprofilerna möjliggör eftermontering av PLUS toalettarmstöd. Till golvavlopp. Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS). Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 400 mm Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i> Hastighet upp: 12 mm/s Hastighet ner: 12 mm/s 48 dB
Material	Anodiserad aluminium. Frontplattorna är i polystyren (PS). Topplattan i kompakt laminat. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.</i>



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL2 upphängning till toalett med sidoprofiler, till golvvavlopp R8312000
Ergonomi	Upphängning till toalett finns i tre olika färger som passar väl ihop med det moderna badrummet och bidrar till en behaglig och inbjudande badrumsmiljö. Rundade hörn och kanter gör rengöringen snabb och enkel – inga dolda kanter eller håll där smutsen kan gömma sig.
Funktioner	Upphängning till toalett levereras med en manöverdosa som gör att användaren själv eller vårdgivaren kan justera höjden. Sitthöjden kan regleras med hela 400 mm från 425 till 825 mm – även medan användaren sitter toaletten.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6
Kontrollbox	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB3 (Linak), IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

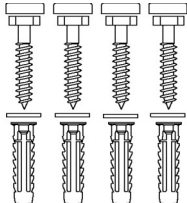
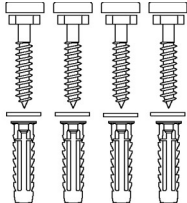
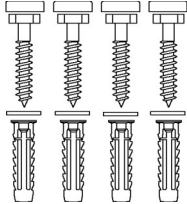
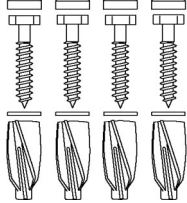
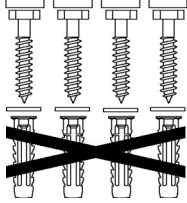
Product Varunummer	SELECT TL2 upphängning till toalett med sidoprofiler, till golvvavlopp R8312000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

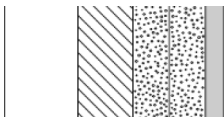
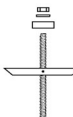
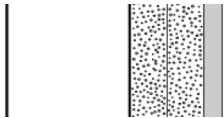
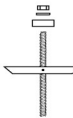
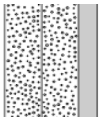
Product	SELECT TL2 upphängning till toalett med sidoprofiler, till golvvavlopp
Varunummer	R8312000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL2 upphängning till toalett med sidoprofiler, till golvavlopp R8312000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®