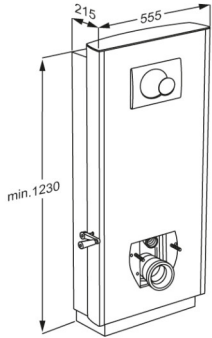




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Bodenablauf R8012000
Farbe	VVS:617991100 NRF:6191041 EAN:5708590345291 HMI: 105967 Weiß
Produkt- beschreibung	 Es geht um die tägliche WC-Benutzung. Und darum, das Hinsetzen und Aufstehen so leicht wie möglich zu machen. Es geht darum, den Helfern die Arbeit zu erleichtern und den Benutzern einen bequemen und würdevollen WC-Besuch zu ermöglichen. SELECT TL1 WC-Lifter, um 300 mm manuelles höhenverstellbar mit Kurbelbedienung. Inkl. eingebauter Spülkasten mit Doppelspülung 3/6 Liter. WC-Keramik und Toilettensitz müssen separat bestellt werden. Für Bodenablauf geeignet. Material: Aluminium eloxiert und Polystyrol (PS). Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 300 mm Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Maximale Belastung: 235 kg (Anwender + Zubehör). Bei einer Belastung des WC-Lifters mit 235 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 65 kg belastet. <i>Der WC-Lifter wurde statisch mit einer Belastung von 600 kg, an der Montagestelle der Toilette, getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen. Bitte beachten Sie, dass die meisten Toiletten, die am WC-Lifter montiert werden können, auf 400 kg getestet wurden.</i>
Materialien	Eloxiertes Aluminium. Die Frontplatte bestehen aus einem Thermoplast Kunststoff (Polystyrol).>br>Abdeckplatte aus Kompaktlaminat mit Aluminium Dekor. Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1 und ISO 8191-2). Testbericht verfügbar.



Produkt	SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Bodenablauf
Produktnummer	R8012000
Ergonomie	Unsere WC-Lifter gibt es in drei verschiedenen Farben, die mit modernen Bädern harmonisieren und zu einem freundlichen, behaglichen Ambiente in Bad und WC beitragen. Eine minimale Anzahl an Rillen, Schlitzten und Löchern macht das Reinigen schnell und effektiv und sorgt zugleich für ein schönes, exklusives Design.
Funktionen	Das WC wird mittels Handkurbel angehoben und abgesenkt. Die Handkurbel lässt sich auf beiden Seiten des Lifters anbringen – ohne Werkzeug. Die Höhenverstellung des WC-Lifters kann alternativ zur Handkurbel auch mit einer Bohrmaschine vorgenommen werden. Das WC ist um 300 mm von 425 bis 725 mm verstellbar. So passt die Sitzhöhe perfekt zu Mobilitätshilfsmitteln wie z. B. einem Rollstuhl. Die Handkurbel ist grundsätzlich links vorgesehen, sollten Sie eine Kurbel auf der rechten Seite wünschen, so muß dies bei der Bestellung angegeben werden.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

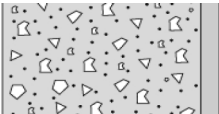
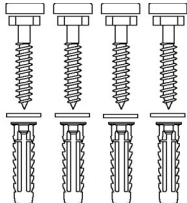
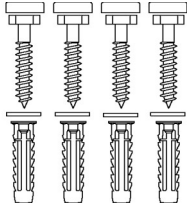
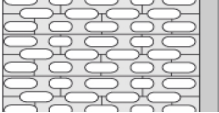
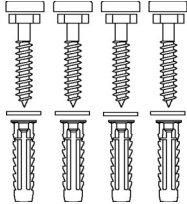
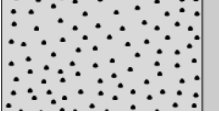
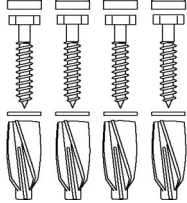
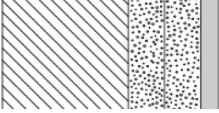
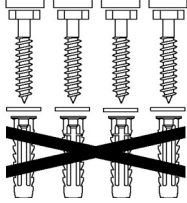
Produkt	SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Bodenablauf
Produktnummer	R8012000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden. Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Konformitäts- erklärung	



PRESSALIT®

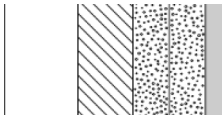
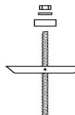
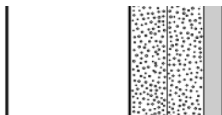
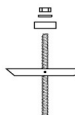
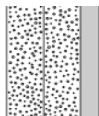
Produkt	SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Bodenablauf
Produktnummer	R8012000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8655 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8605 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit weisse Abdeckung. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SELECT TL1 Toilet-Lifter, für Bodenablauf R8012000			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.			

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®