




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb R8112000
Farve	VVS:617991500 NRF:6191036 EAN:5708590345352 HMI: 105969 Hvid 
Produktbeskrivelse	Det handler om daglig brug. Om at gøre det så let som muligt at komme på og af toilettet. Det handler om at lette arbejdet for plejeren og om at gøre det bekvemt og værdigt for borgeren. SELECT TL2 toiletløfter, 300 mm manuelt højderegulérbar med håndsvingsbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L. Toilet-kumme og toiletsæde skal bestilles separat. De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter. Til gulvafløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Ekskl. monteringskrue til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 300 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringskrue med 65 kg. <i>Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.</i>
Materialer Ergonomi	Anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren. Topplade i kompaktlaminat. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.</i> Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Et minimalt antal riller, slidser og huller gør rengøringen hurtig og effektiv og giver samtidig et smukt og eksklusivt design.

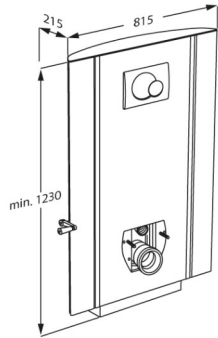

PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000
Funktioner	Toilettet hæves og sænkes med håndsvinget. Håndsvinget kan placeres på begge sider af løfteren – helt uden brug af værktøj. Det er muligt at højdejustere toiletløfteren ved hjælp af boremaskine som alternativ til håndsvinget. Toilettet kan højdejusteres 300 mm fra 425 til 725 mm, så højden altid kan tilpasses perfekt til mobilitetshjælpemidler som f.eks. kørestol.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF



PRESSALIT®


Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

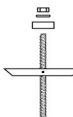Produkt Varenummer	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb R8112000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com