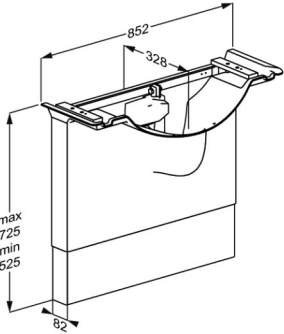




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højderegulérbart R4870000
Farve	VVS: 654022500 NRF: 6132448 EAN: 5708590349138 HMI: 105951 FDA: ILW/D142473 Hvid
Produktbeskrivelse	 MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne. MATRIX vaskophæng, vægmonteret, med hvid installationsinddækning og inkl. skjult til- og afløbssystem. Elektrisk højderegulérbart 200 mm med trykknapper i front af vask. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX SQUARE håndvaske, R2170/R2172). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 200 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 146 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer 30/40 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende , og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg, og vasken vejer 40 kg. så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 146 kg støtter sig til vasken.
Hastighed opad	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højderegulérbart
Varenummer	R4870000
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Styreboks	CA30 Careline (Linak), IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

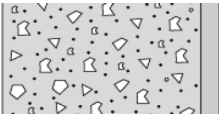
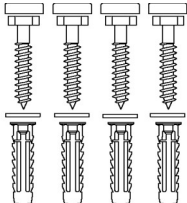
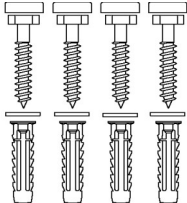
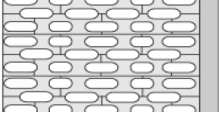
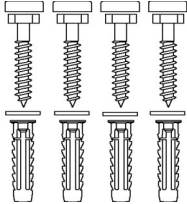
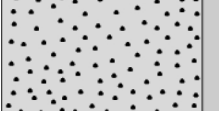
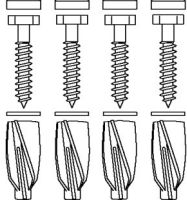
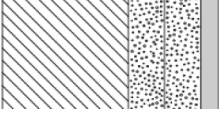
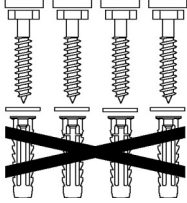
Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højderegulérbart
Varenummer	R4870000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



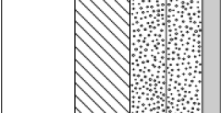
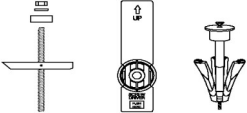
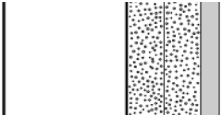
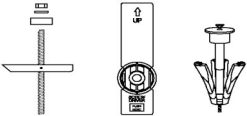
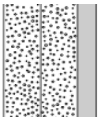
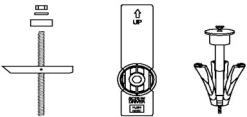
PRESSALIT®

Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højderegulérbart
Varenummer	R4870000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højderegulérbart R4870000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.