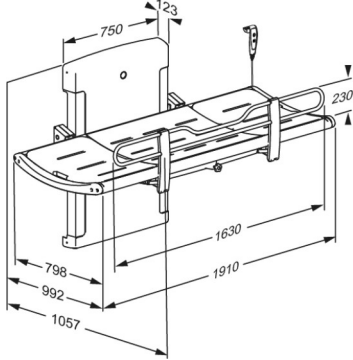




PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, elektrisk höjdglerbart R8582318021
Färg	Blygrå
Beskrivning	VVS: 777543494 EAN: 5708590357515 HMI: 125822  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdglerbara och fast monterad dusch- och vådbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. SCT 3000-serien har en snygg och prisbelönt design med fokus på komfort och användarvänlighet. SCT 3000 duschbrits, eldriven, höjdglerbar 700 mm; från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Uppfällbar. Inkl. sänggrind, avloppsslang (Ø32 mm) och vattenuppsamlingskar med integrerat avlopp. Innermått 1 800 mm, utvändiga mått: 1 057 mm x 1 910 mm. Material: Lackerat stål, aluminium, PUR-skum och plastmaterial. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar	Höjdglerbar
Höjdglering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 227 kg. Maximal belastning (SWL): 237 kg. Vid 227 kg maxbelastning på duschbritsen, belastas varje skruv med 29,5 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 592,5 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standard som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>



Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, elektrisk höjddreglerbart R8582318021
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 15 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s 48 dB
Material Ergonomi Funktioner	Aluminium, PUR-skum, plastmaterial, lackerat stål. • De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av duschvådbritsen. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier. • Vattenuppsamlingskar med integrerad dränering förhindrar att personal och golv blir nerstänkta. Slangen (Ø32 mm) från det centralt placerade avloppet i vattenuppsamlingskaret går till avloppet i golv eller vägg. • Liggplatsens svagt böjda form medverkar till optimal liggkomfort och säkerhet. • Justerbart ryggstöd som kan flyttas till valfri sida av britsen. • Den integrerade gascylindern gör det lätt att fälla upp liggplatsen så att den bara upptar minimalt med plats när den inte används. • Den elektrisk höjddjusterbara duschbritsen levereras med handkontroll. Dom röda knapparna visar tydligt "upp" och "ner". • Handkontrollen levereras med en praktisk hållare för placering på väggar.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40CS Careline (Linak) 4000 N, IPX6
Kontrollbox	SMPS14 Careline (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB3 (Linak), IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 390 W Strömförbrukning vid standby: 2 W



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, elektrisk höjddreglerbart R8582318021
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

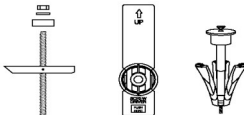
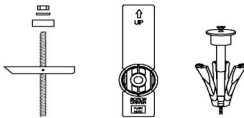
Product	SCT 3000 duschbrits, elektrisk höjddreglerbart
Varunummer	R8582318021

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H1z12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SCT 3000 duschbrits, elektrisk höjdreglerbart R8582318021
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®