




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart R7635000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777517100 NRF: 6317151 EAN: 5708590360201 HMI: 124326  PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. Eldrebet PLUS brusesæde 450 med hul, med ryg- og armlæn. Elektrisk højderegulérbart 500 mm, armlæn kan højdereguleres manuelt uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomer er slidstærke og rengøringsvenlige. Ekskl. monteringskrue til væg. <i>Erstatte R7471</i>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 500 mm Maksimal brugervægt (sæde): 150 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue med 61 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 2,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Hastighed opad Støjniveau	Hastighed op: 10 mm/s Hastighed ned: 10 mm/s 48 dB

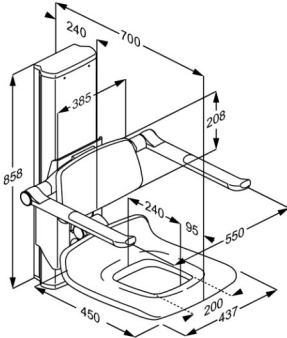

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R7635000
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Ergonomi	Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Den ovale form på armlænene gør dem nemme og behagelige at holde ved, og støtte sig til.
Funktioner	Sæde, ryglæn og armlæn kan justeres samtidigt takket være et sikkert og let klikssystem. Armlænene kan også justeres uafhængigt af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn kan foldes sammen når de ikke er i brug. Med elektrisk betjening er det muligt for hjælperen at indstille sædet til en god arbejdshøjde, mens brugeren sidder på sædet. Håndbetjeningen leveres med beslag til montering på væggen.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 6000N, IPX6
Styreboks	SMPS14 (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak) IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 60 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.








Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R7635000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
Overenstemmelses-erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.








PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R7635000

Montering i forskellige vægtyper

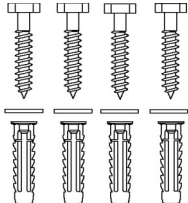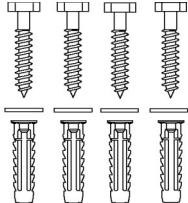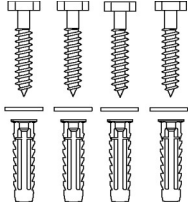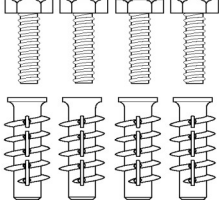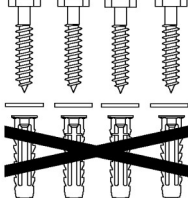	Beton >B25 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

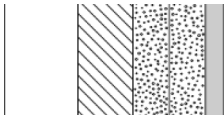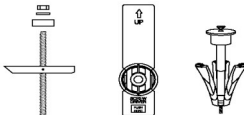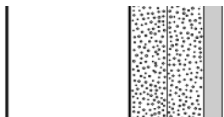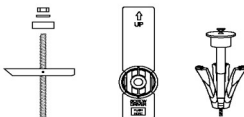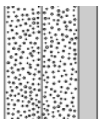

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450 med hul, elektrisk højderegulérbart R7635000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 