




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, linksbedient R391385108
Farbe	NRF:6191163 EAN:5708590368900 HMI: 125890 FDA: ILS/D135866 Dunkelblau (RAL 5011) 
Produkt- beschreibung	Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet. Geeignet für WC's mit einer Ausladung von 700mm oder bodenstehende WC's. <i>Ersetzt die Auslaufmodelle R3575 og RF575.</i> PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung, Gesamtlänge 920 mm. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Linksbedient. Um 240 mm höhenverstellbar auf senkrechter Wandschiene und seitlich verschiebbar. Hochklappbar. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 240 mm Maximale Belastung: 150 kg. Wenn der Stützklappgriff mit 150 kg belastet ist, wird jeder Montageschraube in dem horizontalen Wandschiene mit 44 kg belastet. <i>PLUS Stützklappgriffe sind mit einem Gewicht von bzw. 700 kg (nahe an der Wand), 425 kg (in der Mitte) und 225 kg (an der äußersten Punkt) statisch getestet worden.</i>
Materialien	Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen.

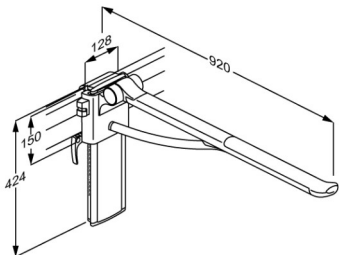

Produkt	PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R391385108
Ergonomie	Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt. Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinstezt bzw, autsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.
Funktionen	Der Stützklappgriff ist hochklappbar. An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren. Der Stützklappgriff ist mit einem integrierten Dämpfer ausgestattet. Mit Hilfe davon lässt sich der Stützklappgriff in einer ruhigen, gleitenden Bewegung hoch- und runterklappen.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R391385108
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R391385108
	Verwendungszweck Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen, aufstehen oder sich seitlich vom Rollstuhl umsetzen, sicheren Halt. Betriebsbedingungen Zum Gebrauch in Nassräumen wie Badezimmern oder Waschräumen, zuhause, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Bei professioneller Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer 10 Jahre. <i>Die Lebensdauer wurde gemäß ISO 17966:2016 getestet.</i> Für die Wartung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigelegt ist und die ebenfalls auf der Webseite unter „Downloads“ gefunden werden kann.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®