




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till väggavlopp R9124000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS:617989500 NRF:6191193 EAN:5708590372976 HMI: 138244  SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjdjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring. SELECT TL4 upphängning till toalett, till väggavlopp. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Eldriven höjdjusterbar 200 mm med kontrollpanel på toalettarmstöd. Förberedd för douche-wc eller douche-wc-sits. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd (nödvändigt för höjdjusteringen) måste köpas separat. Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	200 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmålet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 10 mm/s Hastighet ner: 10 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.

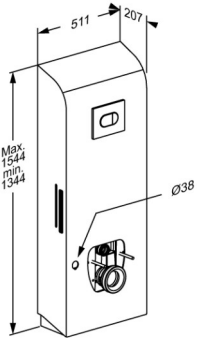

PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till väggavlopp R9124000
Anslutnings ström (V) Strömförbrukning (max.belastning)	230 Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektroniskrot i enlighet med WEEE-direktivet.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Product	SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till väggavlopp
Varunummer	R9124000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL4 upphängning till toalett, elektrisk, till väggavlopp R9124000	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

pressalit.com