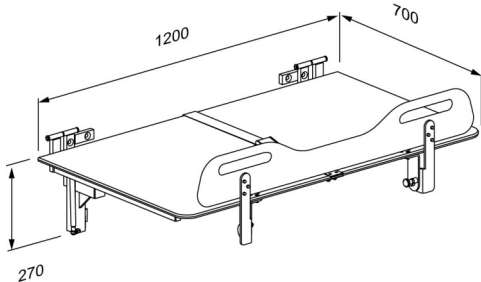




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau R8455512000
Farbe	VVS: 777540820 EAN: 5708590376585 HMI: 138135 FDA: INT/D124320 Weiß
Produkt- beschreibung	 Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer. CT 5000 Pflegeliege, Liegefläche in Kompaktlaminat, 700 x 1200 mm , weiß. Mit Seitengitter und Körpergürtel, hochklappbar, Festeinbau, Wandmontage.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Festmontage 0 mm Maximales Benutzergewicht (MUM): 150 kg. Maximale Belastung (SWL): 150 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 150 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 52 kg belastet. <i>Die Duschliege ist mit 225 kg statisch getestet gemäß den Anforderungen der Norm ISO 17966, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 erfordert.</i>
Materialien	Lackierter Stahl, Liegefläche in Kompaktlaminat.



Produkt	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau
Produktnummer	R8455512000
Ergonomie	Die ergonomisch geformten Seitengitter des Pflegeliege haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Pflegeliege versetzt, gewechselt und angezogen werden kann. Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro
Konformitäts- erklärung	Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



PRESSALIT[®]

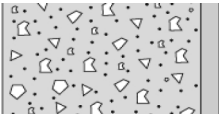
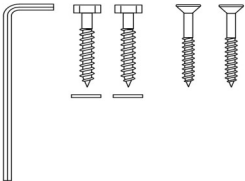
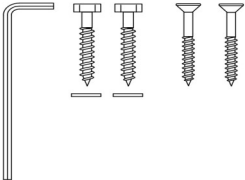
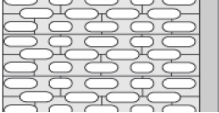
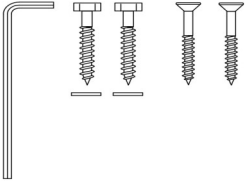
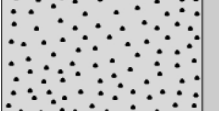
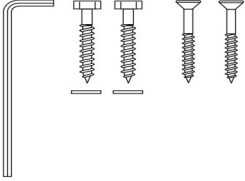
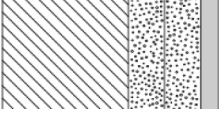
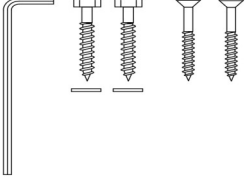
Produkt	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau
Produktnummer	R8455512000



PRESSALIT®

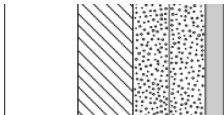
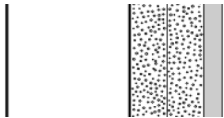
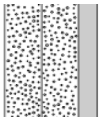
Produkt	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau
Produktnummer	R8455512000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	Vollziegel >= Mz12 Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	Porenbeton P4 Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung Befestigungsmaterial, 2 Stck Schlüsselschrauben Ø10 x 70 und 2 Stck Senkkopfschrauben Ø10 x 80	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	CT 5000 Pflegeliege, Festeinbau R8455512000	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	

Inkl. Befestigungsschrauben für Wand. Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrekte Dübeln verwendet werden. Bitte Montageanleitung sehen.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®