




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder und manuell seitlich verschiebbar R4680
Produkt- beschreibung	VVS: 654002200 NRF: 6132533 RSK: 7972591 EAN: 5708590309446 HMI: 71757 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS Waschtisch-Lifter sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen. PLUS Waschtisch-Lifter mit Gasdruckzylinder. Betätigungshebel kann als Handtuchhalter dienen und kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. Um 300 mm (stufenlos) höhenverstellbar auf senkrechter Wandschiene und Seitlich verschiebbar. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2064/R2065/R2067. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht und ABS-Polymer. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch, exkl. waagerechter PLUS Wandschiene.
Verstellung Höhenverstellung	Höhen- und seitlich verstellbar 300 mm

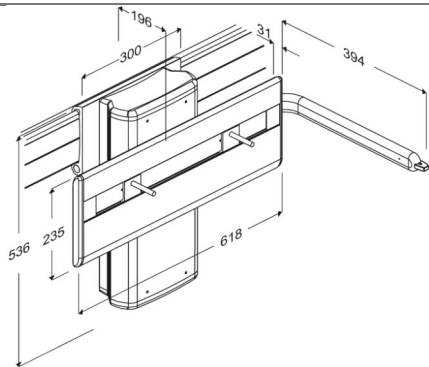

Produkt Produktnummer	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder und manuell seitlich verschiebbar R4680
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: 135 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 135 kg, trägt jede Befestigungsschraube 30 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 135 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 151 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien Ergonomie Funktionen	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Der Betätigungshebel besteht aus einem Schalter aus ABS-Polymer am Ende eines Arms aus eloxiertem Aluminium. Die Waschtischhöhe lässt sich mit Hilfe des Betätigungshebels einstellen. Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert. Der Betätigungshebel kann als Handtuchhalter verwendet werden. Der Betätigungshebel kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. Wird standardmäßig mit einem Gasdruckzylinder für Waschtische von 16-20 kg geliefert. Kann mit Gasdruckzylindern für Waschtische von 8-12 kg. bzw. 12-16 bestellt werden.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgetauscht oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder und manuell seitlich verschiebbar
Produktnummer	R4680
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist produziert worden gemäß: - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

pressalit.com