



PRESSALIT®

**Toiletsæde Dania med låg, 100 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Inkl.
stænkskærm.**

Varenummer

R34000
VVS: 615687000
NRF: 6191646
EAN: 5708590070537
HMI: 1814
NBS: N13:300
DB: 2296034

Toiletsæde Dania, 10 cm forhøjet, med låg. Inkl. stænkskærm. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.






Farve

Hvid

Beskrivelse

Toiletsæde Dania, 10 cm forhøjet, med låg. Inkl. stænkskærm. Med specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder mere stabilt - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast.

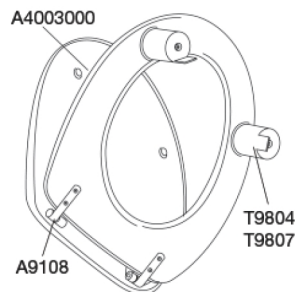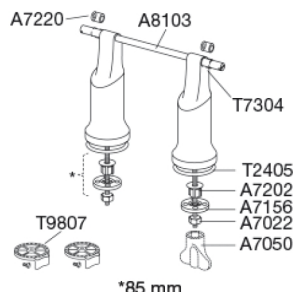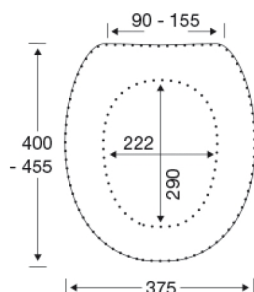

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Dette produkt er testet statisk med 225 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 150 kg.



**Toiletsæde Dania med låg, 100 mm forhøjet
Med styrebuffer og specialbeslag tilpasset forhøjet sæde. Inkl.
stænkskærm.**

Vægt	4,5 kg
Vægt emballeret	5,1 kg
Vægt pr. kolli	5,1 kg
Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	24
Antal pr. palle	24
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.