




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm RT873000
Farve	VVS:777539000 NRF:7501039 EAN:5708590314150 HMI: 124198 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>PLUS frontstøtter fås i tre forskellige længder og flere farver, de kan bruges enten som front- eller rygstøtte.</p> <p>PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm. Til PLUS brusesæde 310 og PLUS toiletstøtter</p>
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 70 kg.
Materialer	Stål og plast
Ergonomi	Stabiliserer og korrigerer bruger med nedsat kropsbalance.
Funktioner	For personer med fysiske handicap, især dem med begrænset overkropsstyrke/stabilitet, eller dem, der lider af ufrivillige bevægelser eller anfald, er der en meget reel risiko for at falde fremad, ned af toilettet. I modsætning til stropper og bæltter, der kan klemme og føles ubehagelige mod huden, fastgøres disse justerbare frontstøtter direkte mellem to PLUS toiletstøtter eller mellem armlænene på et PLUS-brusersæde. Hermed holdes brugerne sikkert og komfortabelt på plads, hvilket forbedrer deres sikkerhed og bevægelighed. Samtidig hjælper de plejerne med at holde på plads og giver øget tryghed.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabriktionsfejl.

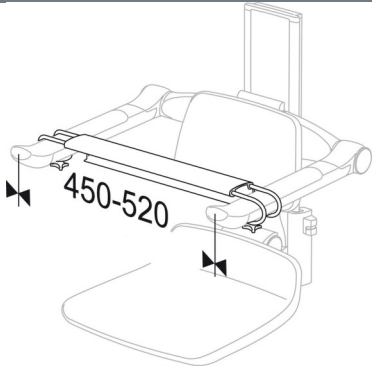

Produkt	PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm
Varenummer	RT873000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS frontstøtte, 450 - 520 mm
Varenummer	RT873000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®