




Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar R4780
Beschrijving	<p>VVS: 654003210 NRF: 6132537 RSK: 7972595 EAN: 5708590309330 HMI: 71756 NBS: N13:30,335</p>  <p>PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS wastafel muurframe, elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met elektrisch bedienbare hendel. Tevens zijwaarts verstelbaar. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoersysteem R2064/R2065/R2067. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materialen: aluminium en ABS polymeer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. Voor montage op horizontale PLUS wandrails (niet inbegrepen).ter op de afvoer.</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 300 mm



Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar R4780
Product capaciteit	Maximale belasting: 100 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 100 kg, zal elke wandbevestiging met 22 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 100 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 104 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 23 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame is afgedekt met ABS-polymeer. Het frame is uitgevoerd met een hendel bestaande uit een ABS polymeer schakelaar aan het uiteinde van een geanodiseerde aluminium arm.
Ergonomy	De hoogte van de wastafel is eenvoudig aan te passen met behulp van de handmatige bedieningshendel. Het muurframe is geschikt voor montage van alle typen wastafels met boutbevestiging. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken.
Funktie	De arm van de bedieningshendel kan als handdoekhouder fungeren. De bedieningshendel kan aan de rechter- of linkerzijde van de wastafel worden geplaatst. Een onafhankelijke gebruiker kan eenvoudig het elektrisch aangestuurde wastafel muurframe bedienen.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

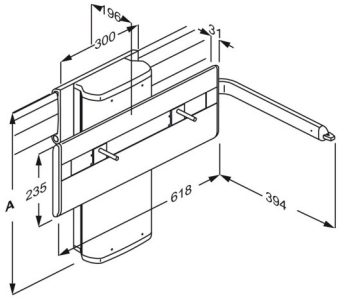

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R4780
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> <p>"</p>
Conformiteitsverklaring	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen- Machinerichtlijn 2006/42/EEG- RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar en handmatig zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R4780

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®