




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, fastmonteret R7304000
Farve	VVS: 777513000 NRF: 6317084 EAN: 5708590359274 HMI: 121181 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulerbare og manuelt regulerbare, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS brusesæde 310. Fastmonteret. Sædet er opklappeligt. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Ekskl. monteringsskruer til væg. <i>Erstatter R7310</i>
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 113 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer Ergonomi Funktioner	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på sædet er forseglet med endepropper i ABS. Ergonomisk designet sæde - siddeflade 310 x 365 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort. Sædet kan klappes op, når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

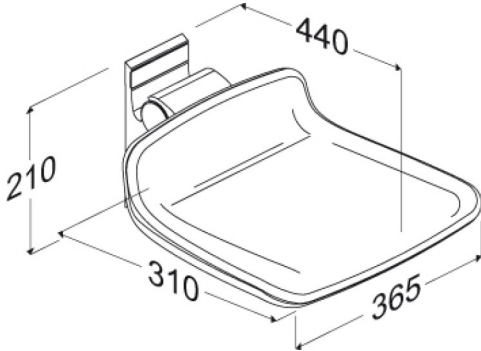

Produkt	PLUS brusesæde 310, fastmonteret
Varenummer	R7304000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 310, fastmonteret
Varenummer	R7304000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8654 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8604 - Monteringssæt, 4 stk undersænkede franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 310, fastmonteret R7304000		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com