




PRESSALIT®

Product Varunummer	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjreglerbar R9502721000
Färg	Vit
Beskrivning	<p>VVS: 777542530 EAN: 5708590389882 HMI: 147816 FDA: INW/D546021</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MCT 5 mobilt vårdbrits, 700 x 2100 mm, två nedfällbara sidor. Manuellt höjjusterbar med fodpedal (hydraulisk). 500 mm höjjustering från 550 till 1050 mm. Madrass måste beställas separat.</p>
Justerbar	Höjreglerbar
Höjjustering	500 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 205 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 307,5 kg, enligt kraven i ISO 17966 standarden som kräver testning med säkerhetsfaktor 1,5.</i>
Material	Plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat stål.

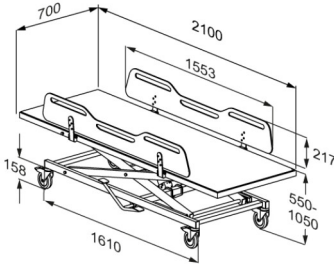

Product Varunummer	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjreglerbar R9502721000
Ergonomi	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare.• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av duschvårdbritsen.• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Den mobila vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



Product	MCT 5 mobil vårdbrits, manuell höjreglerbar
Varunummer	R9502721000
Rengöring	<p>Rengör produkten med en fuktig trasa som vridits ur efter att ha doppats i en mild tvålblandning, t.ex. en universal rengöringslösning. Efter rengöringen är det viktigt att torka av produkten med en torr, mjuk trasa. Detta steg är mycket viktigt för att förhindra att materialet missfärgas. Dessutom hjälper det till att förhindra att ytans färg försämras.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>