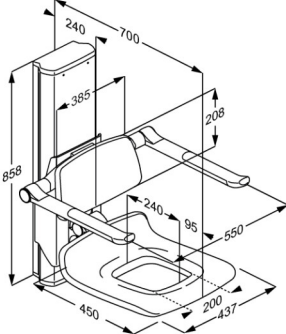




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450 met opening, elektrisch in hoogte verstelbaar R7635000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777517100 NRF: 6317151 EAN: 5708590360201 HMI: 124326</p>  <p>Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar. Beschikbaar met en zonder opening in de het zitgedeelte en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS douchezitting 450 met opening, en rug- en armleuningen. Elektrisch in hoogte verstelbaar over 500 mm, de armleuningen zijn onafhankelijk verstelbaar. De zitting en de armleuningen zijn opklapbaar. Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel. het anti-slip grijp oppervlak van de armleuningen is gemaakt van zachte SEBS. Voor montage op de horizontale PLUS wandrail. (niet inbegrepen)</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	500 mm
<b>Product capaciteit</b>	<p>Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg. Maximale belasting voor armleuningen is 55 kg. Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 81 kg.</p> <p><i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 2,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i></p>
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 10 mm/s Speed down mm: 10 mm/s
<b>Noise level</b>	48 dB



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450 met opening, elektrisch in hoogte verstelbaar R7635000
<b>Materialen</b>	De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een voorgevormd oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. De rugleuning is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim dat is beschermd met een heldere PU laklaag. De armleuningen zijn voornamelijk gemaakt van geanodiseerd aluminium van 10 micrometer, met een antislip-grip oppervlak aan het einde van zachte SEBS en met een met glasvezel versterkte nylon kern. De scharnier arm is ook gemaakt van zachte SEBS. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.
<b>Ergonomy</b>	Het ergonomisch zitoppervlak is 450 x 437 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt. De ovale vorm van de armleuningen geeft een comfortabel oppervlakte om op te leunen en tegen aan te duwen.
<b>Funktie</b>	Elektrisch verhogen of verlagen met behulp van handbediening kan de douchezitting eenvoudig naar boven of beneden worden aangepast tot een juiste werkhoogte voor de verzorger, terwijl de gebruiker erop zit. De zitting, rugleuning en armleuningen kunnen gelijktijdig worden aangepast dankzij een veilig en eenvoudig kliksysteem. De armleuningen kunnen ook onafhankelijk van de zitting en rugleuning worden aangepast. De zitting en armleuningen kunnen opgeklapt worden wanneer de zitting niet in gebruik is of om het vloeroppervlakte te maximaliseren. De handbediening wordt geleverd met houder voor montage aan de muur.
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	Power consumption by maximum load: 60 W Power consumption by standby: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

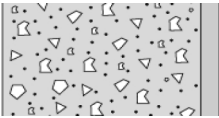
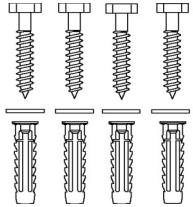

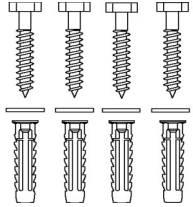
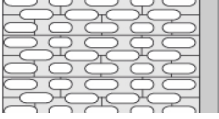
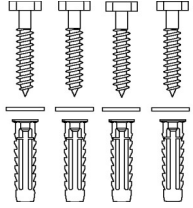
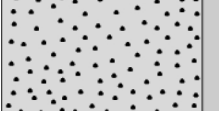
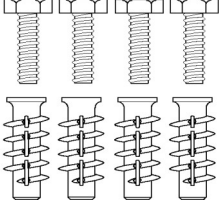
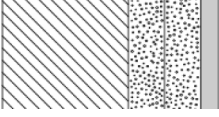
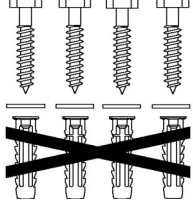


<b>Product</b>	PLUS douchezitting 450 met opening, elektrisch in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R7635000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd.</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
<b>WEEE</b>	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

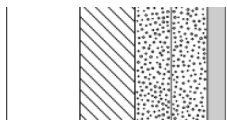
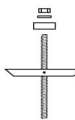

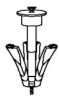
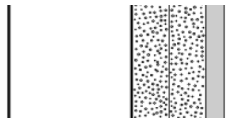
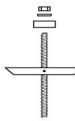

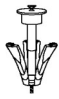
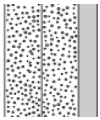


<b>Product</b>	PLUS douchezitting 450 met opening, elektrisch in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R7635000

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen &gt;= H12</b> V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS douchezitting 450 met opening, elektrisch in hoogte verstelbaar R7635000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 