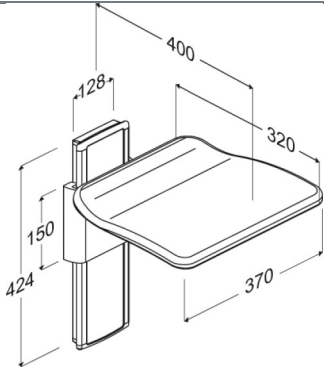




Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar R5520112112
Farbe	VVS: 777531212 NRF: 7501004 EAN: 5708590321349 HMI: 130158 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	 <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Der Sitz ist hochklappbar. Exkl. Befestigungsmaterial. Klappsitze sind für Verwendung in der Dusche nicht geeignet. Siehe Duschsitze stattdessen.</p> <p>PLUS Klappsitz. Um 240 mm höhenverstellbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff. Exkl. Befestigungsmaterial.</p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 240 mm Maximales Anwendergewicht: 265 kg. Bei einer Belastung der Klappsitz mit 265 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 23 kg belastet. <i>PLUS Klappsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i>
Materialien	Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht, Duroplast und Kunststoff.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

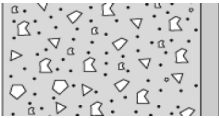
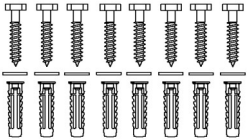

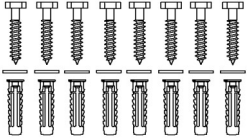
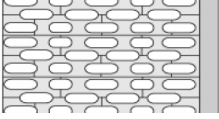
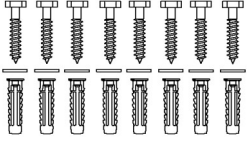
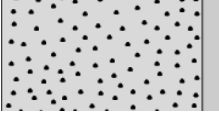
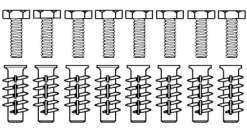
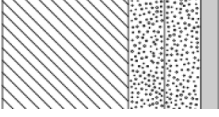
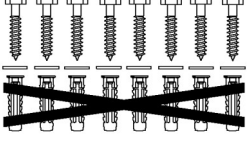


Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5520112112
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>

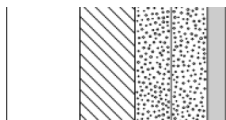
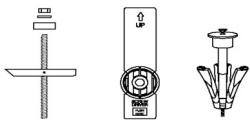
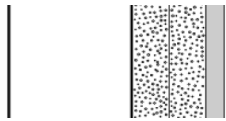
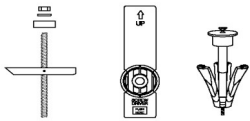
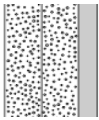


Produkt	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R5520112112

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8660 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8610 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



Produkt Produktnummer	PLUS Klappsitz, manuell höhenverstellbar R5520112112	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung Befestigungsmaterial (8 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	