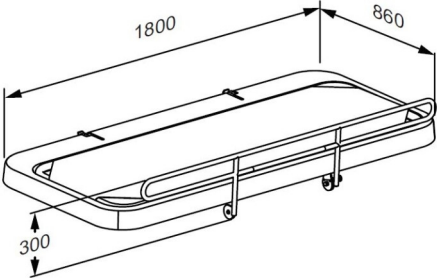




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, fastmonteret R8425218000
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS: 777543020 EAN: 5708590372167 HMI: 130360 FDA: INT/D124320</p>  <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>SCT 2000 bruseleje, fastmonteret, opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 860 mm x 1800 mm. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fastmonteret  Maksimal brugervægt (MUM): 175 kg. Maksimal belastning (SWL): 175 kg. Når bruselejet belastes med 175 kg, belastes hver monteringsbolt med 52 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 262,5 kg, i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
<b>Materialer</b> <b>Ergonomi</b>	Konstruktion i pulverlakeret rustfrit stål, finmasket netovertræk i PVC-belagt polyester (for ekstra holdbarhed) og vandopsamlingsbakke i PVC-U.  2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere. Seriens bruselejer har desuden en finmasket netdug, som lader vandet passere igennem til opsamlingsbakken nedenunder. Flexibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejds højde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugers komfort.

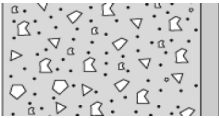
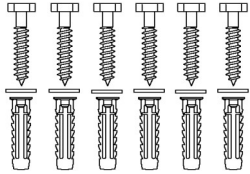

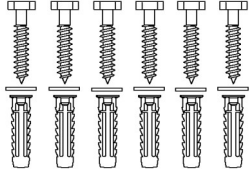
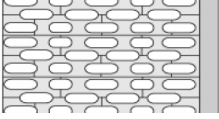
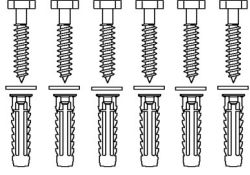
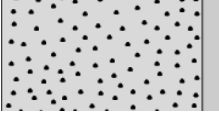
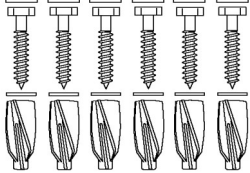
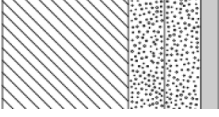
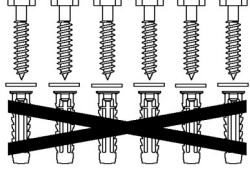


<b>Produkt</b>	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8425218000
<b>Funktioner</b>	<p>Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv.</p> <p>Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg.</p> <p>Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.</p> <p>Nettet på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.</p>
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>

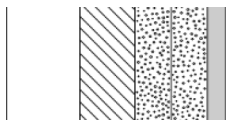
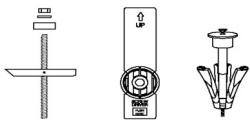
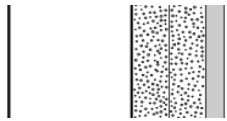
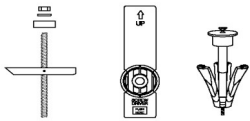
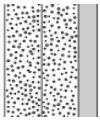



<b>Produkt</b>	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, fastmonteret
<b>Varenummer</b>	R8425218000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, fastmonteret R8425218000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.