




Produkt Produktnummer	VALUE Wandgestell, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder R1210000
Farbe	VVS:654011300 NRF:6191663 EAN:5708590176710 HMI: 25575 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>VALUE Waschtisch-Lifter, Wandmontage. Manuell, um 315 mm höhenverstellbar, mit Gasdruckzylinder Betätigungshebel. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübel müssen separat bestellt werden.</p> <p>VALUE Waschtisch-Lifter, Wandmontage. Manuell, um 315 mm höhenverstellbar, mit Gasdruckzylinder Betätigungshebel. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübel müssen separat bestellt werden.</p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	315 mm
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: 80 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 80 kg, trägt jede Befestigungsschraube 20 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 80 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 77 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>



Produkt	VALUE Wandgestell, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder
Produktnummer	R1210000
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan
Funktionen	Höhenverstellbar um 315 mm.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>

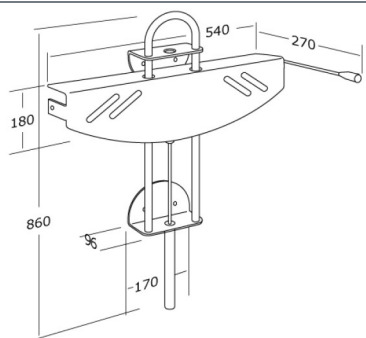

PRESSALIT®

Produkt	VALUE Wandgestell, manuell höhenverstellbar mit Gasdruckzylinder
Produktnummer	R1210000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®