




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MCT 2 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar R9432717000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777542210 EAN: 5708590373201 HMI: 128429</p>  <p>Pressalit biedt een reeks hoogwaardige, vaste, flexibele en mobiele douche- en aankleedtafels van hoge kwaliteit. Deze zijn ontworpen om een stabiel platform te bieden dat geschikt is voor het verzorgen van volwassenen en kinderen. De douche- en aankleedtafels kunnen worden gebruikt in scholen, instellingen, ziekenhuizen en in privéwoningen, en zijn allemaal ontworpen om duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken. Ontwerp en flexibiliteit zorgen voor optimale werkomstandigheden voor de verzorgende en voor een hoog niveau van comfort en veiligheid voor de gebruiker.</p> <p>MCT 2 mobiele aankleedtafel, 820 x 1790 mm, twee uitklapbare zijpanelen. Elektrisch in hoogte 400 mm verstelbaar, van 550 tot 950 mm, met afstandsbediening (op batterijen). Uitgerust met centraal vergrendelingssysteem, draadmand voor gemakkelijke opslag, stootranden op alle vier de hoeken, evenals accu en oplader. Hefkolommen en bekabelde afstandsbediening IPX6, batterij en oplader IPX6. Matras apart te bestellen.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	400 mm
<b>Product capaciteit</b>	Maximale gebruikersbelasting (MUM): 200 kg. Maximale belasting (SWL): 250 kg. (gebruikersbelasting + water + accessoires). <i>Dit product is statisch getest met een belasting van 625 KG zoals de IEC 60601-1 norm vereist dat er getest wordt met een veiligheidsfactor van 2,5.</i>
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 19 mm/s Speed down mm: 19 mm/s
<b>Materialen</b>	Aluminium, plastic, Compact Density Fiberboards (CDF) en gepoedercoat roestvrij staal.



<b>Product</b>	MCT 2 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R9432717000
<b>Ergonomy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomisch ontworpen veiligheidsrails hebben een praktisch lager middengedeelte, dat een betere toegang en werkomgeving biedt voor de verzorger tijdens het verplaatsen, verschonen en aankleden van de gebruiker.</li><li>• Met één hand te bedienen veiligheidsrails stelt de verzorger in staat om zowel oogcontact als fysiek contact met de gebruiker te houden gedurende het hele proces. De opvouwbare veiligheidsrails bieden ook eenvoudige toegang vanaf alle vier de zijden van de douche en aankleedtafel.</li><li>• De uitgespaarde handgrepen in de veiligheidsrails stellen gebruikers in staat te helpen bij het draaien, wat fysieke training stimuleert.</li><li>• Een opberglade stelt de verzorger in staat om benodigdheden op te bergen en wat nodig is voor het douchen direct vooraf binnen handbereik te hebben.</li><li>• Gemakkelijk te reinigen, gladde contactvlakken die geen vuil en bacteriën verzamelen.</li></ul>
<b>Functie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De mobiele aankleedtafel kan van kamer naar kamer worden verplaatst voor eenvoudig transport en meerdere gebruikers. Twee hefkolommen worden gebruikt om een esthetisch aantrekkelijke, hygiënisch geoptimaliseerde, fysiek en visueel stabiele constructie te creëren.</li><li>• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke neerklapbare veiligheidsrails met bediening met één hand.</li><li>• Het gecentraliseerde remsysteem stelt de verzorger in staat om de vier de wielen tegelijkertijd te vergrendelen door op een enkele activator te bedienen, wat zorgt voor meer veiligheid en gebruiksgemak in elke positie.</li><li>• Alle vergrendelings- en ontgrendelingsactivatoren worden geactiveerd door deze van bovenaf met je voet te bedienen om ergonomische interactie te garanderen en voet- en teenletsels te voorkomen. Antislip oppervlak en patroon op alle remmen voorkomen wegglijden, zelfs in natte omstandigheden.</li><li>• Een roterende stootrand op elk van de hoeken van de trolley beschermt de omringende muren en het product zelf bij contact en tijdens verplaatsing.</li><li>• Elektrische hoogteverstelling met accu en oplader. De wandoplader voor de batterij kan in elke kamer worden gemonteerd, tevens buiten de badkamer indien gewenst. Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt er een pieptoon telkens wanneer de bekabelde afstandsbediening wordt geactiveerd.</li><li>• Oplaadtijd batterij 3-4 uur.</li><li>• Draaidiameter: 1935 mm.</li></ul>

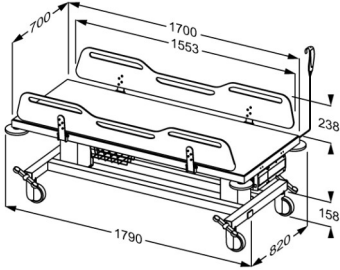

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MCT 2 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar R9432717000
<b>Mains connection (V)</b> <b>Actuator (motor)</b> <b>Control box</b> <b>Wired remote control</b> <b>Power consumption (maximale belasting)</b>	230 BL1 (Linak) IPX6 COL50 (Linak) IPX6 HB30 (Linak) IPX6 Power consumption by maximum load: 80,5 W Power consumption by standby: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. LET OP! Als het product wordt geplaatst in een omgeving welke zwaar onderhevig is aan zout of chloor, wordt de garantieperiode verminderd van de normale 3 jaar naar 1 jaar. Zout en chloride hebben een corrosief effect op de componenten van het product en zullen de levensverwachting van het product verkorten.



<b>Product</b>	MCT 2 mobiel aankleedtafel, elektrisch in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R9432717000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
<b>WEEE</b>	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>