



| | |
|---|---|
| Produkt Produktnummer | PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar R4750 |
| Produkt- beschreibung | <p>VVS:654003110 NRF:6132534 RSK:7972592 EAN:5708590309309 HMI: 71761 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473</p>  <p>PLUS Waschtisch-Lifters sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Waschtisch-Lifter, Wandmontage. Elektrisch, um 300 mm höhenverstellbar, mit Betätigungshebel. Betätigungshebel kann als Handtuchhalter dienen und kann wahlweise auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067. Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch (mit MATRIX SMALL und MATRIX CURVE/NEW CURVE Waschtischen empfohlen). Materialien: Aluminium und ABS polymer. Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| Verstellung Höhenverstellung | Höhenverstellbar 300 mm |



| | |
|--|--|
| Produkt | PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar |
| Produktnummer | R4750 |
| Produktkapazität | Maximale Belastbarkeit: 100 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 100 kg, trägt jede Befestigungsschraube 42 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 100 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 104 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i> |
| Aufwärtsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 23 mm/s |
| Geräusch | 45 dB |
| Materialien | Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Der Betätigungshebel besteht aus einem Schalter aus ABS-Polymer am Ende eines Arms aus eloxiertem Aluminium. |
| Ergonomie | Die Waschtischhöhe lässt sich mithilfe des Betätigungshebels einstellen. Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert. |
| Funktionen | Der Betätigungshebel kann als Handtuchhalter verwendet werden. Der Betätigungshebel kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden. |
| Stromanschluss (V) | 230 |
| Motor | LA40 (Linak) 4000N, IPX6 |
| Steuerkasten | SMPS14002 |
| Stromverbrauch (max. Belastung) | Stromverbrauch, maximal Belastung: 75 W Stromverbrauch, standby: 1,5 W |
| Garantie | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |

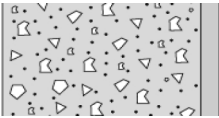
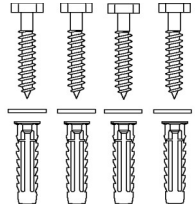

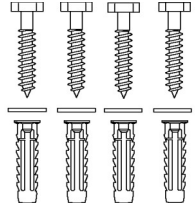
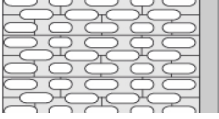
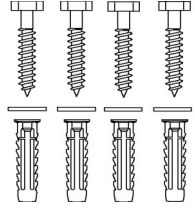
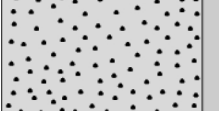
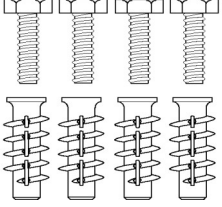
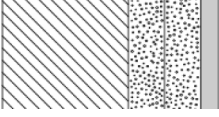
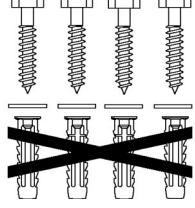


| | |
|----------------------|---|
| Produkt | PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar |
| Produktnummer | R4750 |
| Reinigung | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p> |
| WEEE | Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird. |
| Produzent | Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark |

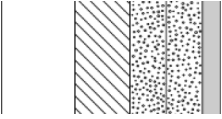
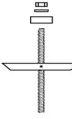

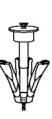
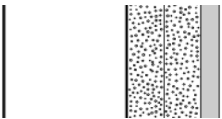
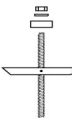


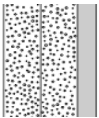
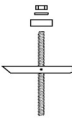




| | |
|----------------------|--|
| Produkt | PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar |
| Produktnummer | R4750 |

Montage in verschiedenen Wandtypen

| | | |
|---|---|---|
|  | Beton >B25 V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. |  |
|  | Vollziegel >= Mz12 V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. |  |
|  | Kalklochsandstein >= Hlz12 V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden. |  |
|  | Porenbeton P4 V8653 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden. |  |
|  | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. |  |



| | | |
|---|---|---|
| Produkt Produktnummer | PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar R4750 | |
|  | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|  | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|  | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |