




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R6444035
Farbe	NRF:6317051 EAN:5708590365527 HMI: 124205 FDA:INN/D135865 Rot (RAL 3003)
Produkt- beschreibung	PLUS Rückenlehnen werden in verschiedenen Farben und Versionen angeboten. Sie sind sowohl in fester Höhe als auch verstellbar erhältlich. Sie eignen sich zur Wandmontage hinter einer Toilette ohne Spülkasten oder zur Montage an einem der Pressalit WC-Lifter SELECT. PLUS Rückenlehne, 385 x 209 mm, gepolstert. Um 150 mm höhenverstellbar und seitlich verschiebbar, zur Montage auf waagerechter Wandschiene hinter einer Wand-WC ohne Spülkasten. Abnehmbar ohne Werkzeug und leicht wieder zu anbringen. Material: Aluminium und PUR-Schaumstoff mit einer in-mould-coating Oberflächenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschützt. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhen- und seitlich verstellbar 150 mm Maximale Belastbarkeit: 50 kg. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Bei einer Belastung mit 50 kg, trägt jede Befestigungsschraube 33 kg. <i>Rückenlehnen müssen in der Lage sein, das Gewicht der Person zu tragen, die sich dagegen lehnt. Die Rückenlehne soll nicht das gesamte Körpergewicht einer Person tragen. Eine für die Rückenlehne geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung bei 50% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 50 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 100 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien	Der Rückenlehne ist aus PUR-Schaumstoff hergestellt und ist mit einer Oberflächenbeschichtung versehen sowie mit PUR-Klarlack geschützt. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Kanten der Rückenlehne sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.



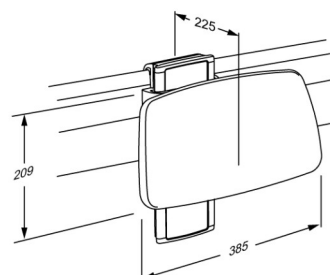

Produkt Produktnummer	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R6444035
Ergonomie Funktionen	Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an. Für WC ohne Spülkasten. Der Rückenlehne kan mit eingebautem Spülkasten verwendet werden.
Garantie Reinigung	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausbessert oder neu geliefert werden. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwenden werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Erisan OXY+ Tvättsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Wichtig: PUR-Oberflächen von PLUS Duschsitze und PLUS Rückenlehne erhalten ein anti-bakterielles Coating, das durch andere Reinigung als Wasser und Seife zerstört werden kann. Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Rückenlehne, höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
Produktnummer	R6444035

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026