




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulerbart R9632721000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 777542320 EAN: 5708590389943 HMI: 139822</p>  <p>Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren.</p> <p>MCT 3 mobilt skifteleje, 700 x 2100 mm, to nedfældbare sider. Elektrisk højderegulerbart med håndbetjening. 500 mm højderegulering fra 450 til 950 mm. Madras skal bestilles separat.</p>
Justerbarhed	Højderegulerbar
Reguleringshøjde	500 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Maksimal belastning (SWL): 205 kg. <i>Lejet er testet statisk med 512,5 kg, i henhold til kravene i IEC 60601-1 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 2,5.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 17 mm/s Hastighed ned: 17 mm/s
Støjniveau	50 dB
Materialer	Kunststof, kompaktlaminat og lakeret stål.

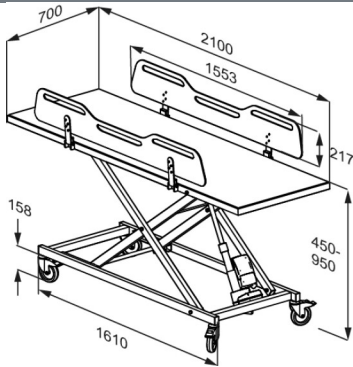

Produkt	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9632721000
Ergonomi	<ul style="list-style-type: none">• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, skiftning og påklædning af brugeren.• Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. De nedfældbare sengeheste giver også let adgang fra alle fire sider af lejet.• De udskårne greb i sengehestene gør det muligt for brugerne selv at hjælpe til, når de vendes, hvilket motiverer fysisk træning.• Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	<ul style="list-style-type: none">• Lejet kan nemt flyttes fra rum til rum, og bruges af flere brugere.• Intuitive, brugervenlige og nedfældbare sengeheste med énhånds betjening.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) IPX6
Styreboks	CA30 (Linak) IPX6
Håndbetjening	HB30 (Linak) IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 280 W Strømforbrug, standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



Produkt	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulerbart
Varenummer	R9632721000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med en fugtig klud, der er vredet op i en mild sæbeblanding, som f.eks. et universalrengøringsmiddel. Efter rengøring er det vigtigt at aftørre produktet med en tør, blød klud. Dette trin er afgørende for at forhindre misfarvning af materialerne. Derudover er det en hjælp til at forhindre en potentiel forringelse af overfaldemalingen.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	MCT 3 mobilt skifteleje , elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R9632721000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®