



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp R8012112
Färg	VVS:617991112 NRF:6191042 EAN:5708590345307 HMI: 105967 FDA: IKX/D319729 Antracitgrå
Beskrivning	 Det handlar om daglig användning. Om att göra det så lätt som möjligt att komma på och av toaletten. Det handlar om att underlätta vårdgivarens jobb och om att göra det bekvämt och värdigt för användaren. SELECT TL1 upphängning till toalett, manuell höjdjusterbar 300 mm med handvevsmanövrering. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L. Toalettstol och toalettsits måste köpas separat. Till golvavlopp. Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS). Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 300 mm Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmiddel. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
Material Ergonomi	Anodiserad aluminium. Frontplattorna är i polystyren (PS). Topplattan i kompakt laminat. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.</i> Upphängning till toalett finns i tre olika färger som passar väl ihop med det moderna badrummet och bidrar till en behaglig och inbjudande badrumsmiljö. Ett minimalt antal rännor, skåror och hål gör rengöringen snabb och effektiv och ger samtidigt en snygg och exklusiv design.



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvvavlopp R8012112
Funktioner	Toaletten höjs och sänks med handveven. Handveven kan placeras på båda sidorna av upphängningen – utan att man behöver använda verktyg. Det är möjligt att justera höjden på upphängningen till toaletten med en bormaskin som alternativ till handveven. Toaletten kan regleras 300 mm från 425 till 725 mm, så höjden kan alltid anpassas helt till förflytningshjälpmedel, t.ex. rullstol.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

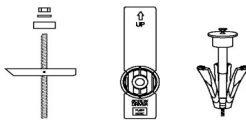
Product	SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp
Varunummer	R8012112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvvavlopp R8012112	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com