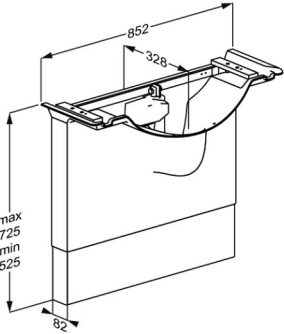




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX wastafel muurframe elektrisch, in hoogte verstelbaar R4870000
Kleur	VVS: 654022500 NRF: 6132448 RSK: 7508072 EAN: 5708590349138 HMI: 105951 FDA: ILW/D142473 Wit
Beschrijving	 MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen. MATRIX wastafel muurframe, wandmontage, met witte afdekplaat en inclusief flexibel aan- en afvoer systeem. Elektrisch in hoogte verstelbaar over 200 mm met bedieningstoetsen aan voorzijde van de wastafel. Inclusief bevestigingsbouten voor wastafel (kan alleen worden gebruikt met MATRIX SQUARE wastafels, R2170/R2171). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materialen: Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 200 mm



Product Artikelnummer	MATRIX wastafel muurframe elektrisch, in hoogte verstelbaar R4870000
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 146 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die 30/40 kg wegen. Wanneer de wastafel belast is met 150 kg, draagt elke wandbevestiging 60 kg. <i>De wastafel muurframes moeten in staat zijn om het gewicht van de wastafel te dragen, evenals het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunt of die gebruik maakt van de wastafel om zichzelf op te trekken vanuit zittende positie.</i> <i>De wastafel en wastafelsteunen zijn niet bedoeld om een persoon te dragen. De testmethoden die van toepassing zijn op de wastafel muurframes weerspiegelen de voorschriften van ISO 17966 waarbij een statische test aan de voorzijde van de wastafel m bij 75% van het maximale gebruikersgewicht kan dragen. d.w.z. Wanneer de maximale belasting van een wastafel muurframe wordt gegeven van 150 kg en de wastafel m weegt 40 kg, het is – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 146 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 11,75 mm/s Speed down mm: 11,75 mm/s
Noise level	48 dB
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Control box	CA30 Careline (Linak), IPX6
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 70 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



Product	MATRIX wastafel muurframe elektrisch, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4870000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®

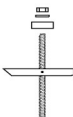
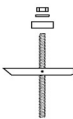
Product	MATRIX wastafel muurframe elektrisch, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4870000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX wastafel muurframe elektrisch, in hoogte verstelbaar R4870000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com