




PRESSALIT®

Product Varunummer	Plus frontstöd, 550 - 620 mm RT874035
Färg	VVS:777539135 NRF:6317197 EAN:5708590314198 HMI: 124195 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Röd (RAL 3003)
Beskrivning	 <p>PLUS frontstöd finns i tre olika längder och flera färger, de kan användas antingen som front eller ryggstöd.</p> <p>PLUS frontstöd, 550 - 620 mm. Till PLUS duschsits 450 och PLUS toalettarmstöd.</p>
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg
Material	Stål och plast
Ergonomi	Stabiliserar och korrigerar användare med nedsatt kroppsbalans.
Funktioner	För personer med fysiska funktionshinder, särskilt de med begränsad överkroppsstyrka / bålstabilitet, eller de som lider av ofrivilliga rörelser eller kramper, det finns en mycket stor risk att falla framåt, ramla av toaletten. Till skillnad från remmar och bälten som kan pressas och kännas obekväma mot huden, är dessa justerbara främre stöd som fästs direkt mellan två PLUS toalettstöd eller mellan armstöden på ett PLUS duschstol. Frontstödet håller användarna säkert och bekväma på plats, vilket förbättrar deras trygghet, rörlighet och säkerhet. Samtidigt hjälper de vårdgivare att hålla användaren på plats och ge ökad trygghet.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

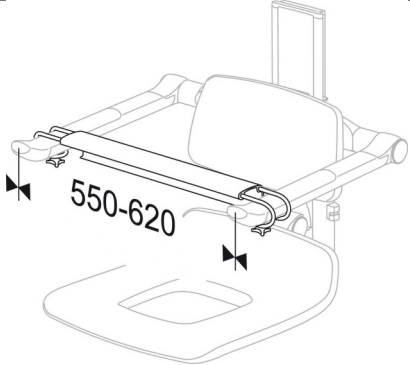

Product	Plus frontstöd, 550 - 620 mm
Varunummer	RT874035
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>