




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MCT 3 mobil vårdbrits, elektriskt höjdregerbar R9632719000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 777542330 RSK: 8565089 EAN: 5708590389936 HMI: 139819</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdbarbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MCT 3 mobilt vårdbrits, 700 x 1900 mm, två nedfällbara sidor. Elektrisk höjdbarbar med manöverdosa. 500 mm höjdbarbar från 450 till 950 mm. Madrass måste beställas separat. Obs: MCT 3 måste vara ansluten till en huvudströmkälla för att kunna använda höjdbarbarfunktionen.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdregerbar
<b>Höjdbarbar</b>	500 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 205 kg. <i>Britsen har testats statistiskt med 512,5 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standarderna som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 17 mm/s Hastighet ner: 17 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	50 dB

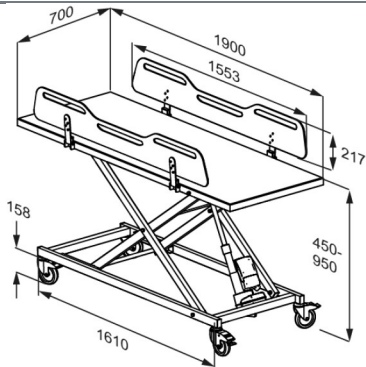

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MCT 3 mobil vårdbrits, elektriskt höjreglerbar R9632719000
<b>Material</b> <b>Ergonomi</b>	Plastmaterial, Compact Density Fiberboards (CDF) och lackerat stål. <ul style="list-style-type: none"><li>• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare.</li><li>• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen.</li><li>• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.</li><li>• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.</li></ul>
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.</li></ul>
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 (Linak) IPX6
<b>Kontrollbox</b>	CA30 (Linak) IPX6
<b>Manöverdosa</b>	HB30 (Linak) IPX6
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 280 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



<b>Product</b>	MCT 3 mobil vårdbräns, elektriskt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R9632719000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med en fuktig trasa som vridits ur efter att ha doppats i en mild tvålblandning, t.ex. en universal rengöringslösning. Efter rengöringen är det viktigt att torka av produkten med en torr, mjuk trasa. Detta steg är mycket viktigt för att förhindra att materialet missfärgas. Dessutom hjälper det till att förhindra att ytans färg försämras.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	MCT 3 mobil vårdbräns, elektriskt höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R9632719000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®