



Product Varunummer	PLUS stödhandtag 600 mm RT102000
Färg	VVS:777565300 NRF:6191671 RSK:8980544 EAN:5708590145907 HMI: 19083 NBS:N13:436 Vit
Beskrivning	<p>PLUS stödhandtag är produkter av hög kvalitet, som kan kombineras på en mängd olika sätt och fullände inredningen idet funktionella och praktiska badrummet. En stabil lösning med stödhandtag och ett otal kombinationsmöjligheter kan hjälpa brukaren att klara sig bättre på egen hand.</p> <p>PLUS stödhandtag, diameter 33 mm, längd 600 mm, för fast montering. Avståndet på 50 mm från vägg till stödhandtag på ett monterat stödhandtag gör det enkelt att greppa handtaget. Inkl. väggrosett, som gömmer monteringskruvarna. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
Produktkapacitet	Max belastning: 235 kg. När stödhandtaget belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 56 kg. <i>Stödhandtag testas med säkerhetsfaktor 1,5 i enlighet med kraven i SS/ISO 17966:2016.</i>
Material Ergonomi	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast. Handtagets diameter är 33 mm. Handtaget ligger därför bra i handen och möjliggör ett stadigt grepp. Ett monterat handtag håller ett avstånd på 50 mm från väggen. Avståndet gör det lätt att greppa handtaget.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



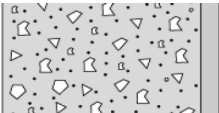
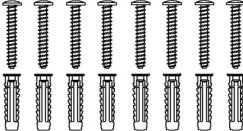

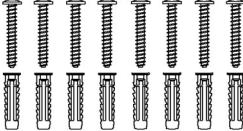
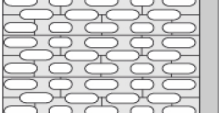
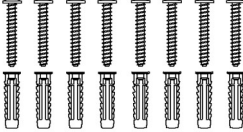
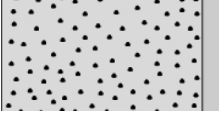
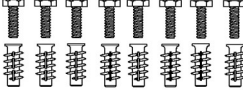
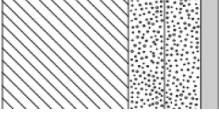
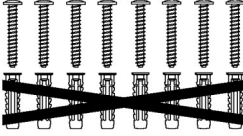
PRESSALIT®

Product	PLUS stödhandtag 600 mm
Varunummer	RT102000
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

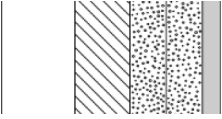
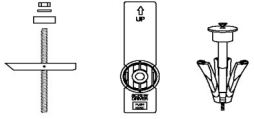
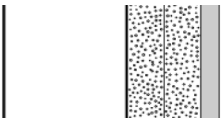
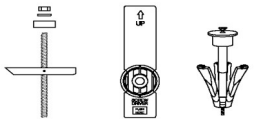
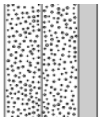


Product	PLUS stödhandtag 600 mm
Varunummer	RT102000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8666 - Monteringsset 8 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8616 - Monteringsset 8 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	PLUS stödhandtag 600 mm RT102000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 