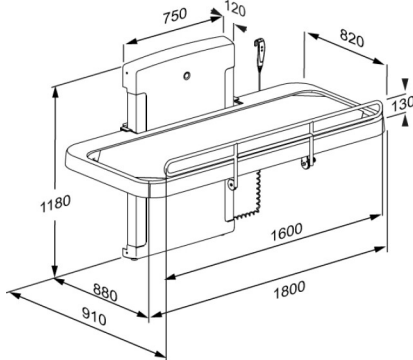




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SCT 2100 Duschliege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar R8581418000
<b>Farbe</b>	VVS: 777543740 EAN: 5708590376110 HMI: 140138  Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>SCT 2100 Duschliege mit Elektromotor, um 700 höhenverstellbar, von 300 mm -1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung.  Hochklappbar. Inkl. Seitengitter und Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf.  Außenmaß 910 mm x 1800 mm.  Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	700 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximales Benutzergewicht (MUM): 200 kg. Maximale Belastung (SWL): 200 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 26 kg belastet. <i>Die Duschliege ist mit 500 kg statisch getestet, gemäß den Anforderungen der Norm IEC 60601-1, die eine Prüfung mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 erfordert.</i>



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SCT 2100 Duschliege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar R8581418000
<b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b> <b>Geräusch</b>	Geschwindigkeit aufwärts: 19 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 21 mm/s 50 dB
<b>Materialien</b> <b>Ergonomie</b> <b>Funktionen</b>	Konstruktion aus lackierter Edelstahl, Segeltuchbespannung aus PVC-beschichtetem Polyester (für zusätzliche Haltbarkeit) und Wasserauffangwanne aus PVC-U. Die Dusch- und Pflegeliege der Serie 2000 zeichnet sich durch eine sehr tiefe Verstellung bis Bodennähe aus, die dem Nutzer das Umsetzen erleichtert, und die Oberfläche der Pflegeliege besteht aus Segeltuchbespannung für einfache Reinigung. Die flexible Höhenanpassung der Liege bietet Nutzern und Helfern den Vorteil, Ihren täglichen Aufgaben bequem und komfortabel nachzukommen. Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt. Die Duschliege kann an die Wand geklappt werden, sodass sie nur wenig Platz einnimmt, wenn sie nicht gebraucht wird. Kabelgebundene Fernbedienung: Die elektromotorische Höhenverstellung wird über die Fernbedienung gesteuert. Die Oberfläche vom Segeltuchbespannung kann einfach gereinigt werden und können auch abgenommen und separat gewaschen werden.
<b>Stromanschluss (V)</b> <b>Motor</b> <b>Steuerkasten</b> <b>Kabelgebundener Fernbedienung</b> <b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	230 LA40 Careline (Linak), 4000 N, IPX6 CA63 Careline, (Linak), IPX6 HB30 (Linak), IP66 Stromverbrauch, maximal Belastung: 420 W Stromverbrauch, standby: 0,5 W
<b>Garantie</b>	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



# PRESSALIT®

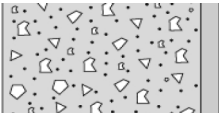
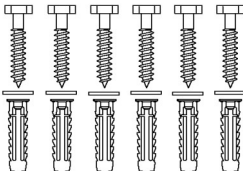

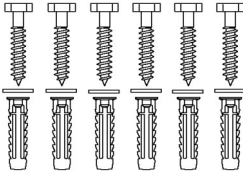
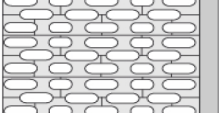
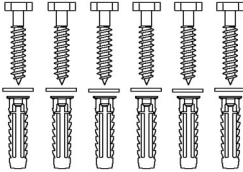
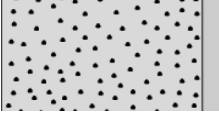
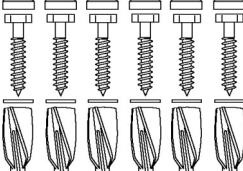
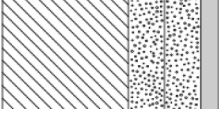
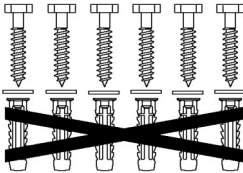
<b>Produkt</b>	SCT 2100 Duschliege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R8581418000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



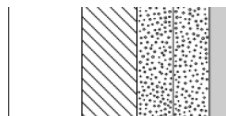
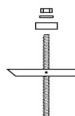


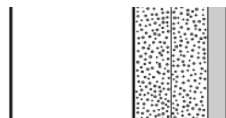
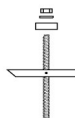

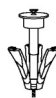
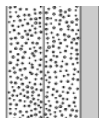

PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	SCT 2100 Duschliege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R8581418000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	SCT 2100 Duschliege, Segeltuchbespannung, elektrisch höhenverstellbar R8581418000			
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.			
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.			

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.