




Product Artikelnummer	VALUE montageplaat, handmatig in hoogte verstelbaar R1214000
Kleur	VVS:654011410 NRF:6191676 EAN:5708590176499 HMI: 25578 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Wit
Beschrijving	 <p>Montageplaat incl. muurframe voor wastafel, in hoogte verstelbaar 150 mm (aanbeveling R2065/R2067 flexibel aan-/afvoer systeem). Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur</p> <p>Montageplaat incl. muurframe voor wastafel, in hoogte 150 mm verstelbaar (aanbeveling R2065/R2067 flexibel aan-/afvoersysteem). Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 150 mm Maximale belasting: 80 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 80 kg, zal elke wandbevestiging met 22 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 80 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 77 kg leunend op de voorzijde van de wastafel m.
Materialen	Basismateriaal: staal Oppervlakte materiaal: Rilsan



Product	VALUE montageplaat, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R1214000
Functie	In hoogte 150 mm verstelbaar
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreineriger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

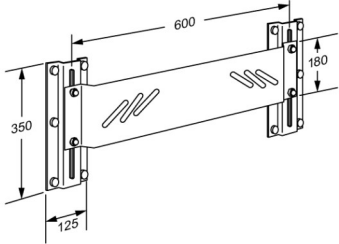

PRESSALIT®

Product	VALUE montageplaat, handmatig in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R1214000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®