




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande R1083000
Couleur	VVS:615892302 NRF:6191055 EAN:5708590346854 HMI: 138195 FDA: ILS/D135866 Blanc
Description	 <p>VALUE et VALUE II barres de relèvement avec l'aile ALBA profil de montage sont conçus pour usage avec SELECT TL3 et TL4 ensembles wc. Le réglage en hauteur électrique de l'ensembles wc est fait uniquement avec le panneau de commande sur la barre de relèvement.</p> <p>VALUE barre de relèvement, avec panneau de commande pour TL3/TL4, 850 mm, rabattable, réglable en hauteur 150 mm sans outils (par la main gauche). Fournit un soutien ferme en position assise, debout ou lors du transfert vers et depuis les toilettes. Materiaux : acier revêtu de Rilsan, aluminium moulé sous pression, l'extrémité de barre en nylon (PA). Pour montage sur TL3/TL4 ensemble wc électrique, aile ALBA profil de montage inclus. Pour montage sur le côté droite de l'utilisateur.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	150 mm
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 120 kg
Materiaux	La barre de relèvement est fait en acier revêtu de Rilsan qui est confortable à toucher, facile à nettoyer et qui protège contre la corrosion. Les extrémités sont fait en nylon (PA). La profil de montage est fait en aluminium moulé sous pression.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

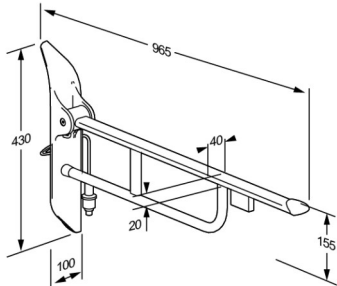

Article	VALUE barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande
Numéro article	R1083000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>
WEEE	<p>Renseignez-vous auprès de la filiale Pressalit de votre pays, ou de votre distributeur local (pour les pays n'ayant pas de filiale), qui prendra les dispositions nécessaires pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.</p>



PRESSALIT®

Article	VALUE barre de relèvement, 850 mm, avec panneau de commande
Numéro article	R1083000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®