




Produkt	VALUE II Stützklappgriff, 850 mm
Produktnummer	R1181000
Farbe	VVS:615892100 NRF:6191059 EAN:5708590373010 HMI: 138203 FDA: ILS/D135866 Weiß
Produkt- beschreibung	VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit ALBA-Flügel Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL3 und TL4 WC-Lifters entwickelt. Die elektrische Höhenverstellung des WC-Lifters ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich. VALUE II Stützklappgriff, 850 mm, hochklappbar, höhenverstellbar 150 mm ohne Werkzeug (rechtsbedient). Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette. Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl und Aluminiumdruckguss. Für die Nachmontage auf TL3/TL4 elektrischem/manuellem WC-Lifter, Montageprofil mitgeliefert. Links vom Benutzer montiert.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	150 mm
Produktkapazität	Maximale belastbarkeit: 120 kg
Materialien	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan© (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Das Befestigungsprofil besteht einem Aluminiumdruckguss.
Ergonomie	VALUE II Stützklappgriff mit ALBA-Flügel, 850 mm, weiß. Höhenverstellbar, rechtsbedient, zur Nachmontage auf TL3/TL4 (links)
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



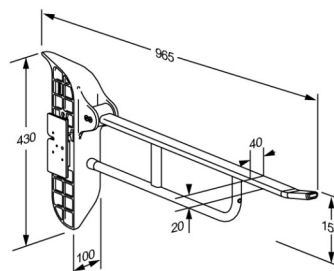

Produkt	VALUE II Stützklappgriff, 850 mm
Produktnummer	R1181000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.