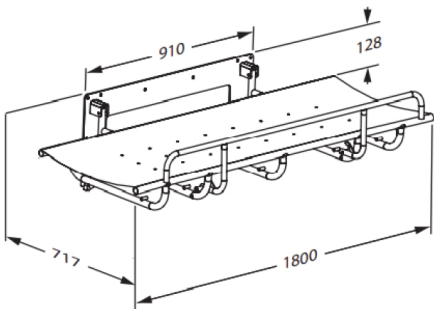




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret R8407000
Farve	VVS: 777545380 EAN: 5708590294827 HMI: 88217 NBS: N13:40,375 FDA: INT/D124320 Hvid
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 1000 bruseleje, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. sengehest. Udvendige mål: 747 mm x 1800 mm. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 150 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Når lejet belastes med 150 kg, belastes hver monteringsbolt med 46 kg. <i>Briksen er testet statisk med 225 kg i henhold til kravene i ISO 17966 standarden, som kræver test med en sikkerhedsfaktor på 1,5.</i>
Materialer Ergonomi Funktioner	Pulverlakeret rustfrit stål, PVC-belagt kanvasdug (ftalat-fri). Bruseplejelejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Sengehesten er enkel at slå op/ned. Bruseforhæng (tilvalg) beskytter hjælperen mod vandsprøjt.



PRESSALIT®

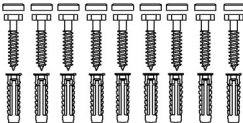
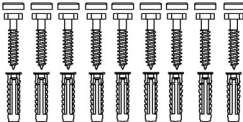
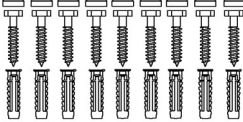
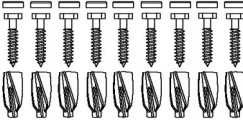
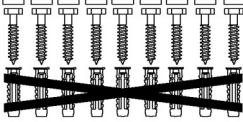
Produkt	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8407000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret
Varenummer	R8407000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8611 - Monteringssæt, 9 stk. sekskantskruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8661 - Monteringssæt, 8 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8611 - Monteringssæt, 8 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 1000 bruseleje, fastmonteret R8407000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com