




<b>Produkt</b>	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
<b>Produktnummer</b>	R1085000
<b>Farbe</b>	<p>VVS:615892502  NRF:6191056  EAN:5708590346861  HMI: 138199  FDA: ILS/D135866  Weiß</p>
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>VALUE und VALUE II Stützklappgriffe mit ALBA-Flügel Montageprofil sind für die Verwendung mit SELECT TL3 und TL4 WC-Lifters entwickelt.  Die elektrische Höhenverstellung des WC-Lifters ist nur mit dem Bedienpanel auf dem Stützklappgriff möglich.</p> <p>VALUE Stützklappgriff, 850 mm, hochklappbar, höhenverstellbar 150 mm ohne Werkzeug (linksbedient).  Eine gute Hilfe beim Sitzen, Stehen oder Transferieren auf der Toilette.  Materialien: Rilsan-beschichteter Stahl, Aluminiumdruckguss, Endkappen in Nylon (PA).  Für die Nachmontage auf TL3/TL4 manuellem WC-Lifter, ALBA-Flügel Montageprofil mitgeliefert. Rechts vom Benutzer montiert.</p>
<b>Verstellung</b>	Höhenverstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	150 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximale belastbarkeit: 120 kg
<b>Materialien</b>	Der Stützklappgriff besteht aus Stahl, mit einer Rilsan© (ein Hochleistungs-Polyamid auf Bio Basis) Beschichtung. Die Oberfläche ist ausgezeichnete gegen Korrosion geschützt und leicht zu reinigen. Die Endkappen werden aus PA Nylon (teilkristalliner Thermoplast) mit herausragender Verschleißfestigkeit hergestellt und das Befestigungsprofil besteht einem Aluminiumdruckguss.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

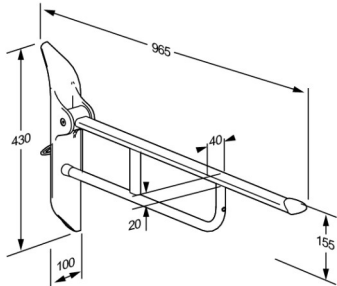

# PRESSALIT<sup>®</sup>

<b>Produkt</b>	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
<b>Produktnummer</b>	R1085000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b></p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	VALUE Stützklappgriff, 850 mm
<b>Produktnummer</b>	R1085000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®