




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart R7424277
Farve	NRF:6317118 EAN:5708590359694 HMI: 124341 FDA:INN/D135865 Limegrøn 
Produktbeskrivelse	PLUS brusesæder tilbydes i flere farver. De fås både som fastmonterede, elektrisk regulérbare og manuelt regulérbare, med og uden hul, samt med tilvalg af ryg- og armlæn. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS brusesæde 450, med ryglæn. Manuelt højderegulérbart 380 mm, uden brug af værktøj. Sæde er opklappeligt. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Ekskl. monteringsskruer til væg. <i>Erstatter R7420</i>
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 380 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 24 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer Ergonomi	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS. Ergonomisk designet sæde - siddeflade 450 x 437 mm. Sædet er lavet af et blødt og skridsikkert materiale, der aldrig føles koldt, samtidig med at det giver en god siddekomfort.

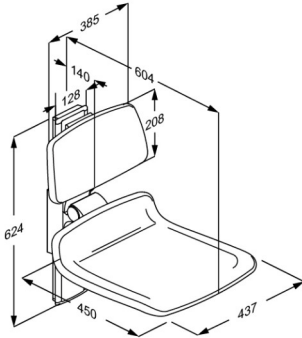

PRESSALIT®






Produkt	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7424277
Funktioner	Sædet kan foldes op når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortynnes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Erisan OXY+ Tvættsprit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.








PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart
Varenummer	R7424277

Montering i forskellige vægtyper

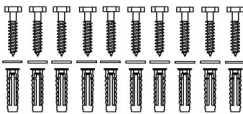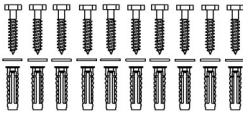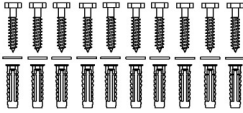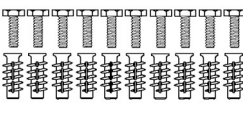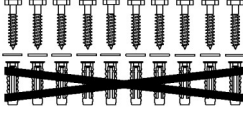	Beton >B25 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

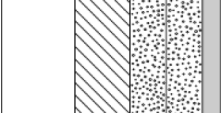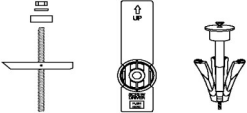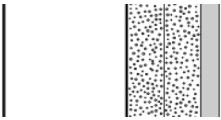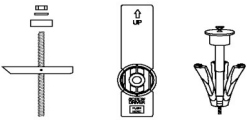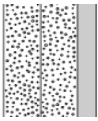

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, manuelt højderegulérbart R7424277		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	