




Produkt Produktnummer	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient R372685000
Farbe	VVS:615878400 NRF:1617114 EAN:5708590391120 Weiß
Produkt- beschreibung	 Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet. PLUS Stützklappgriff mit Bedienpanel und Federbelastung, 850 mm. Höhenverstellbar um 150 mm. Hochklappbar. Linksbedient. Nur für TL5 Toilet-Lifter geeignet. Montageprofil mitgeliefert. Die Armlehne hat eine ovale form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxalschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern.
Verstellung Höhenverstellung	Höhenverstellbar 150 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 150 kg.
Materialien	Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen.

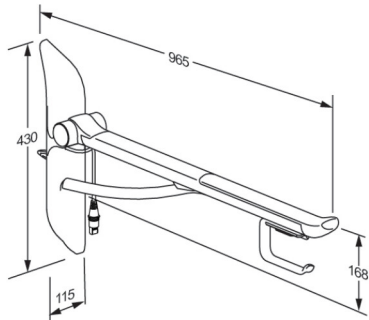

PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient R372685000
Ergonomie	Eine weiche, rutschsichere Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt. Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinstezt bzw, autsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.
Funktionen	Der Stützklappgriff ist hochklappbar. An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS Stützklappgriff, mit Bedienpanel, 850 mm Ausladung, linksbedient
Produktnummer	R372685000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026