




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS ryggstöd, fast höjd R6408000
<b>Färg</b>	VVS: 777530300 NRF: 6317036 EAN: 5708590365411 HMI: 124218 FDA: INN/D135865 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>PLUS ryggstöd finns i flera färger och versioner, de finns både som fasta och justerbara. De är lämpliga för användning bakom en vägghängd toalett utan cisternen eller för montering på en av Pressalits toalettlyftare.</p> <p>PLUS ryggstöd, 385 x 209 mm, vadderad. Fast höjd, för montering på SELECT TL1, TL2, TL3 eller TL4 upphängning till toalett. Material: Aluminium och mjukt porsukum med tråkärna. Ska monteras direkt på upphängning till toalett, monteringskit medföljer.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd Maximal belastning: 50 kg. Maximal användarvikt: 100 kg. När ryggstödet är belastat med 50 kg, är varje väggmonteringskrav belastad med 118 kg. <i>Ryggstödet bör kunna bära vikten hos en person som belastar ryggstödet.</i> <b>Ryggstödet är inte personbärande</b> och den testmetoder som föreskrivs för ryggstöd återspeglar detta: ISO 17966 kräver att ryggstöd testas statistiskt med 50% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett ryggstöd är 50 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 100 kg belastar ryggstödet.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

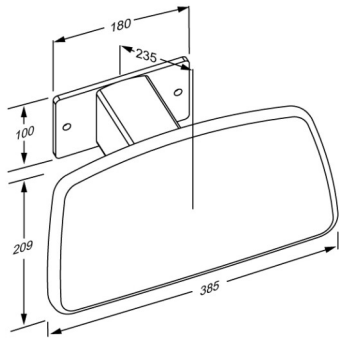

<b>Product</b>	PLUS ryggstöd, fast höjd
<b>Varunummer</b>	R6408000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b>Erisan OXY+ Tvättspirit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>