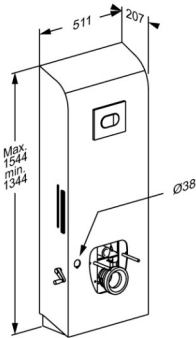




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp R9024000
<b>Färg</b>	VVS:617989100 NRF:6191184 RSK:7828186 EAN:5708590372990 HMI: 138247 FDA: IKX/D319729 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>SELECT elektrisk upphängning till toalett finns i flera modeller och färger för både väggavlopp och golvavlopp. De finns i elektriskt eller manuellt höjjusterbara versioner, med eller utan sidoprofiler och för standardtoalettskålar och duschtoaletter. Allt utvecklat med fokus på hygien och enkel rengöring.</p> <p>SELECT TL4 upphängning till toalett, till väggavlopp. Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L (kan ställas om till 2/4 liter). Manuell höjddreglerbar 200 mm med handvevsmanövrering. Förberedd för douche-wc eller douche-wc-sits. Toalettskål, toalettsits och toalettarmstöd måste köpas separat. Material: Rostfritt stål och PMMA/ABS. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b> <b>Höjjustering</b>	Höjddreglerbar 200 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65 kg. <i>Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.</i>
<b>Material</b>	Toalettlyftaren är tillverkad av rostfritt stål, med monteringskåpa i PMMA/ABS.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

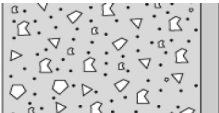
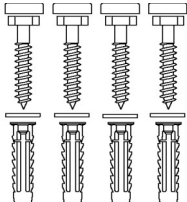

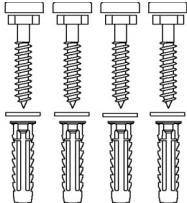
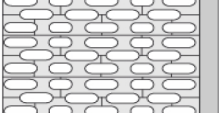
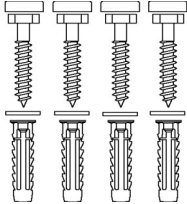
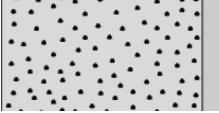
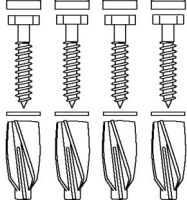
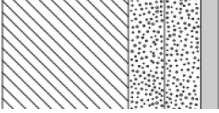
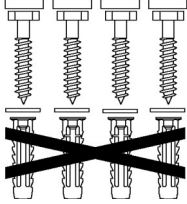


<b>Product</b>	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp
<b>Varunummer</b>	R9024000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

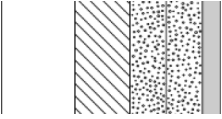
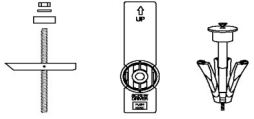
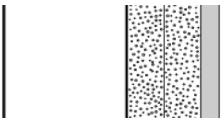
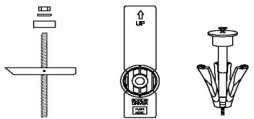
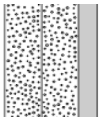


<b>Product</b>	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp
<b>Varunummer</b>	R9024000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	SELECT TL4 upphängning till toalett, manuell, till väggavlopp R9024000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 