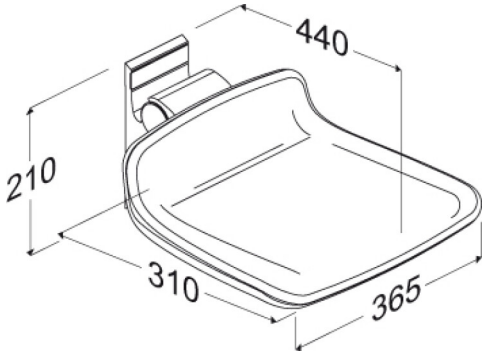




|  |  |
|--|--|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>                 | PLUS douchezitting 310, vaste montage.<br>R7304035   |
| <b>Kleur</b>   | NRF:6317085<br>EAN:5708590359304<br>HMI: 121181<br>FDA:INN/D135865<br><br>Rood (RAL 3003)  |
| <b>Beschrijving</b>                                    |  <p>Plus douchestoelen zijn leverbaar in tal van kleuren. Ze zijn leverbaar op een vaste hoogte dan wel elektrische of handmatig instelbaar, en optioneel te voorzien van een rugleuning of armsteunen.<br/>Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS douchezitting 310. Voor vaste montage. De zitting is opklapbaar.<br/>Materialen: Comfortabel polyurethaan schuim over een kern van multiplex, gemonteerd op een aluminium profiel.<br/>Exclusief bevestigingsset.<br/><i>Vervanger van R7310</i></p> |
| <b>Verstelbaarheid</b><br><b>Product capaciteit</b>    | Vaste montage<br><br>Maximale gebruikers massa (zitting): 200 kg.<br>Wanneer de zitting belast is met 200 kg, is elke wandbevestiging belast met 113 kg.<br><br><i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>   |
| <b>Materialen</b><br><b>Ergonomy</b><br><b>Funktie</b> | De douchezitting is gemaakt van polyurethaan (PU) schuim met een kern van multiplex en is bedekt met een in-mould gecoat oppervlak dat is beschermd met een heldere PU-lak. Interne onderdelen en de bevestigingen zijn voornamelijk gemaakt van RVS. De scharniercilinder is afgedekt met ABS.<br><br>Ergonomisch ontworpen zitting - de contactoppervlakte is 310 x 365 mm. Zacht en antislip materiaal dat warm aanvoelt.<br><br>De zitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om het vloeroppervlakte te maximaliseren.  |
| <b>Garantie</b>  | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.   |

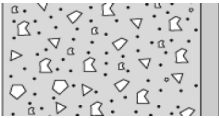
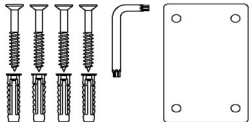

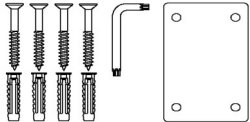
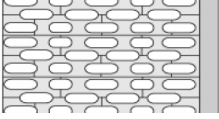
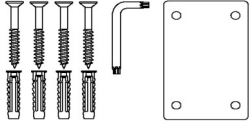
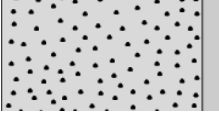
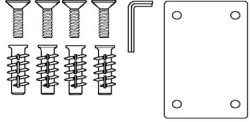
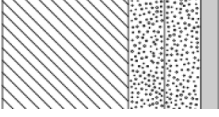
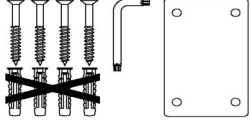


|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | PLUS douchezitting 310, vaste montage.   |
| <b>Artikelnummer</b> | R7304035   |
| <b>Reiniging</b>     | <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br/>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b><br/>Erisan OXY+<br/>Tvättsprit 70%<br/>CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Terralin protect (SCHÜLKE+)<br/>Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b><br/>Wetrok Caledor (Wetrok)<br/>Petrosol Citro (Büfa)</p> <p>Belangrijk: Polyurethaanoppervlakken van PLUS-douchezittingen en PLUS-rugleuningen bevatten een antibacterieel oppervlak, dat wordt aangetast als het met iets anders dan water en zeep wordt gereinigd.</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b><br/>Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p> |

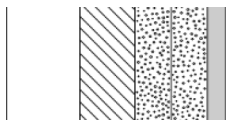
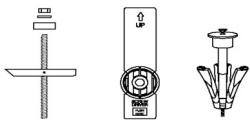
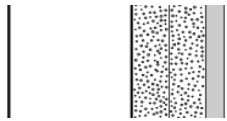
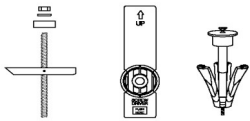
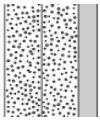



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | PLUS douchezitting 310, vaste montage. |
| <b>Artikelnummer</b> | R7304035                               |

## Installatie in verschillende wandtypes

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld.  |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld.   |   |
|  | <b>Kalksteen &gt;=H12</b><br>V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10.<br>Moeten apart worden besteld.   |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8.<br>Moeten apart worden besteld.  |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | PLUS douchezitting 310, vaste montage.<br>R7304035  |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>                    |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br> |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.<br>  |

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.