




Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdregerbar och manuellt sido reglerbar R4780
Beskrivning	<p>VVS: 654003210 NRF: 6132537 RSK: 7972595 EAN: 5708590309330 HMI: 71756 NBS: N13:30,335</p>  <p>PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ, eldriven med manövreringsgrepp, 300 mm steglös höjdregering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukhängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium och plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).</p>
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet	<p>Höjd- och sidoregerbar 300 mm</p> <p>Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 22 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 104 kg belastar tvättstället.</i></p>
Uppåtgående hastighet	<p>Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s</p>



Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdregerbar och manuellt sido reglerbar
Varunummer	R4780
Ljudnivå	45 dB
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Kontrollbox	SMPS14002
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

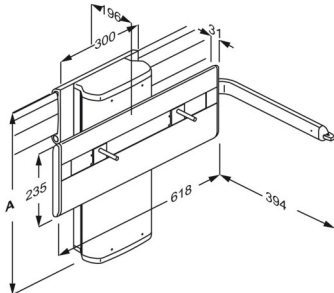

PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdregerbar och manuellt sido reglerbar
Varunummer	R4780
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®