




Product Artikelnummer	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage R1622000112
Kleur	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 Antracietgrijs
Beschrijving	 <p>VALUE IV opklapbare douchezitting en rugleuning verzorgen een eenvoudige oplossing voor gebruikers die moeten gaan zitten tijdens het douchen.</p> <p>VALUE IV douchezitting. Vaste montage. De zitting is opklapbaar. Materialen: gegoten aluminium, Rilsan-gecoat roestvrijstaal en vacuüm-gegoten polyethyleen (PE). Inclusief bevestigingsbouten voor bakstenen muur. De pluggen zijn afhankelijk van het wandtype en moeten apart besteld worden.</p>
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 135 kg. Wanneer de zitting belast is met 135 kg, is elke wandbevestiging belast met 125 kg. <i>Dit product is statisch getest met een veiligheidsfactor van 1,5 wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen..</i>
Materialen Ergonomy Functie	Het wandprofiel is gemaakt van gegoten aluminium en het frame is gemaakt van roestvrijstaal met Rilsan-coating. Rilsan biedt een goede bescherming tegen corrosie en is comfortabel om aan te raken en eenvoudig te reinigen. De zitting is gemaakt van vacuüm-gegoten polyethyleen (PE). Ergonomische douchezitting met een comfortabel zitoppervlak. De douchezitting kan opgeklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt of om meer ruimte te maken. Vloersteun voor extra ondersteuning Met groeven voor de waterafvoer.



Product	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage
Artikelnummer	R1622000112
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
Conformiteitsverklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

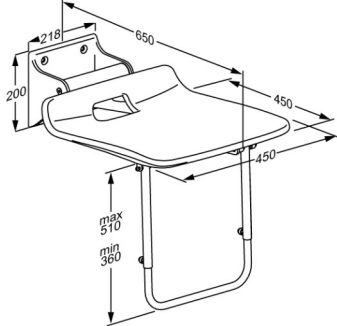

PRESSALIT®

Product	VALUE IV douchezitting met vloersteun, vaste montage
Artikelnummer	R1622000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®