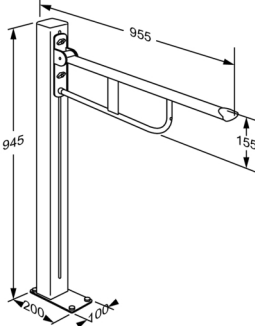




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte på gulvsøjle R1161000
Farve	VVS:615722425 NRF:6190517 RSK:8980351 EAN:5708590176697 HMI: 25416 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 VALUE toiletstøtte, gulvmonteret på fritstående gulvsøjle, totallængde 955 mm. Højderegulerbar, 670 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Inkl. monteringsbolte til massivt gulv. Plugs afhænger af gulvtype og skal bestilles separat. VALUE toiletstøtte, gulvmonteret på fritstående gulvsøjle, totallængde 955 mm. Højderegulerbar, 670 mm. Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium og plast. Inkl. monteringsbolte til massivt gulv. Plugs afhænger af gulvtype og skal bestilles separat.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulerbar 670 mm Maks. lodret belastning: 120 kg.
Materialer	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan Støtteafslutning: Nylon (PA)



PRESSALIT®

Produkt	VALUE toiletstøtte på gulvsøjle
Varenummer	R1161000
Ergonomi	En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig. Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Den afrundede form giver et sikkert og behageligt greb.
Funktioner	Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads. Toiletstøtten er velegnet hvis væggen ikke er stabil, hvis vægmontering ikke er mulig eller hvis afstanden mellem væg og toilet er mere end 700 mm.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

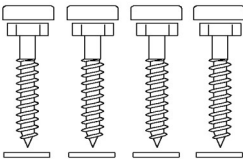
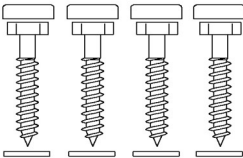
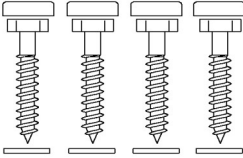
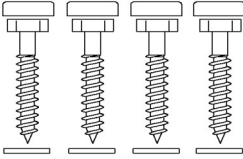
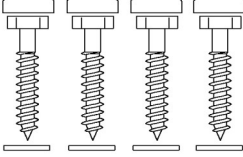
Produkt	VALUE toiletstøtte på gulvsøjle
Varenummer	R1161000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

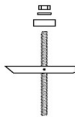
Produkt	VALUE toiletstøtte på gulvsøjle
Varenummer	R1161000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8596 - 4 stk franske skruer Ø10 x 70, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8596 - 4 stk franske skruer Ø10 x 70, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8596 - 4 stk franske skruer Ø10 x 70, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8596 - 4 stk franske skruer Ø10 x 70, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8596 - 4 stk franske skruer Ø10 x 70, med hvide dækknapper medfølger. Plugs skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte på gulvsøjle R1161000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   

Skruer til vægbefæstigelse medfølger. Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekte plugs anvendes. Se venligst monteringsvejledningen.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®