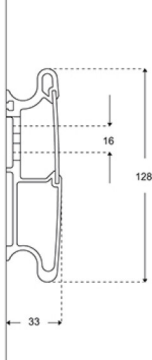




Product Varunummer	PLUS väggskena, 1800 mm R9818112
Färg	VVS:615841118 NRF:7501017 EAN:5708590305813 HMI: 71743 Antracitgrå
Beskrivning	 <p>PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoflyttning av dessa produkter. Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.</p> <p>PLUS väggskena, 1800 mm, för vågrät montering. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.
Ergonomi	Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.
Funktioner	Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

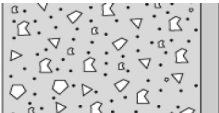
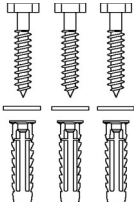

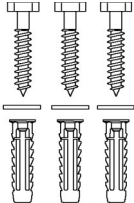
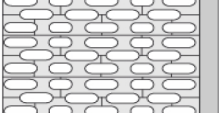
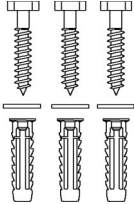
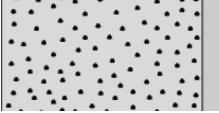
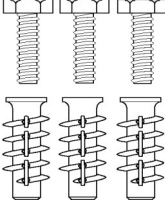
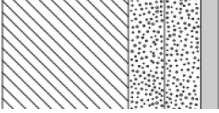
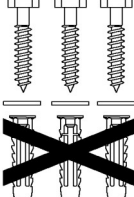


Product	PLUS väggskena, 1800 mm
Varunummer	R9818112
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> <p>Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf</p> <p>Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras</p>



Product	PLUS väggskena, 1800 mm
Varunummer	R9818112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 1800 mm
Varunummer	R9818112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®