




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R371385112
Färg	VVS:615876212 NRF:6191111 EAN:5708590368375 HMI: 125887 FDA: ILS/D135866 Antracitgrå
Beskrivning	 Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. <i>Ersätter utgående modeller R3107 och RF107.</i> PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd 880 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Vänster hand manövrerad. Höjdreglerbart. Avtagbart och uppfällbart. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Till eftermontering på existerande lodrät PLUS väggskena eller SELECT TL2 sidoprofil (medföljer ej).
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 240 mm Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varje monterings skruv med 161 kg. <i>PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).</i>
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.

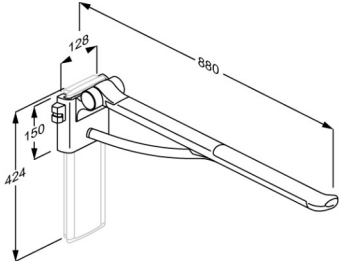

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R371385112
Ergonomi Funktioner	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig. Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



Product Varunummer	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, vänster hand manövrerad R371385112
	Avsedd användning Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol. Användningsmiljö För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år. <i>Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.</i> För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under "Downloads". Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4217/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras